



USER GUIDE



Obelis s.a
Bld. Général Wahis, 53,
Brussels, 1030, Belgium



HEADOVATIONS LTD
3 Adirim st. Tel-Aviv
6918414 Israel

Version: July 2023\2nd Rev
Product May Differ From Shown

headalofft360.com



Table of Contents


Introduction	4
Package Contents.....	6
Safety Recommendations	7
Technical Support	7
Attaching HEADALOFT 360 to the Wheelchair	8
Overview of HEADALOFT 360 Assembly Process	8
Attaching the Connectors to the Wheelchair.....	8
Adjusting and Inserting the Headrest through the Connectors	10
Adjusting Options	13
Adjusting the Height.....	13
Adjusting the Tilt	15
Adjusting for Asymmetrical Use.....	17
Adjusting Lateral Positioning.....	18
Adjusting the Cushions.....	19
Disconnecting HEADALOFT 360	20
Partially Disconnect HEADALOFT 360.....	20
Completely Disconnect HEADALOFT 360	21
Washing Instructions	21
Appendix: Calculating what Adapters to Use	22
Calculation in Centimeters	22
About the Company	23

Introduction


HEADALOFT 360 is a state-of-the-art full headrest system that securely attaches to almost any wheelchair, walker, stander or other device that can be enhanced with a headrest. Once in place, **HEADALOFT 360** gently holds the user's head in a comfortable position, even for long periods of time. In many ways, it can vastly improve the quality of life of anyone using a wheelchair. It provides greater security and prevents the user's head from falling forward. Using **HEADALOFT 360**, people can engage in face-to-face communications with those around them and often gain more independence, feed themselves, relax and watch television, and comfortably sit and engage with their surroundings.

HEADALOFT 360 is easy to assemble and can be attached to any standard wheelchair. It is equally easy to remove, and you only need to detach the headrest to fold the wheelchair for storage or transport. What makes **HEADALOFT 360** unique is not just the ease with which it is installed, but the flexibility that enables it to be easily adjusted regardless of whether the user is sitting straight, leaning forward, or to the left or right.

After **HEADALOFT 360** is attached to the wheelchair, it can be adjusted for any size, whether a child or an adult. In addition to adjusting the width to fit any standard wheelchair, you can also adjust the height, the tilt (forward or back), the symmetry (left or right), and the placing of the head cushions to ensure a proper, customized fit for any user.

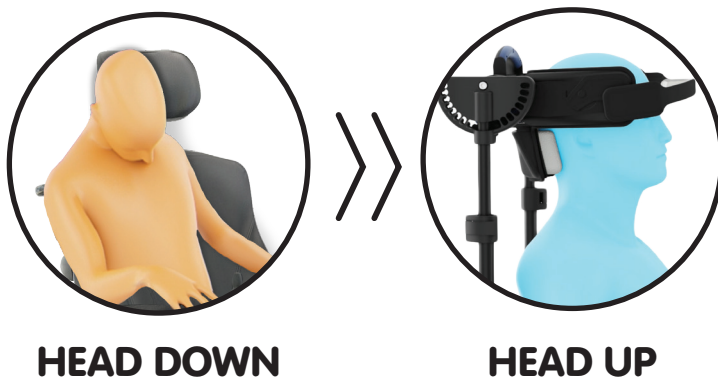

As easily as it is adjusted for any specific size or position, **HEADALOFT 360** can also be easily re-adjusted for someone else, or even for the same user who simply wishes to change positions. To make **HEADALOFT 360** even more customizable, two different size bands are provided to ensure secure and comfortable headrest. With all of these adjustment possibilities, **HEADALOFT 360** is ideal for anyone, from a young child to a full-sized adult.

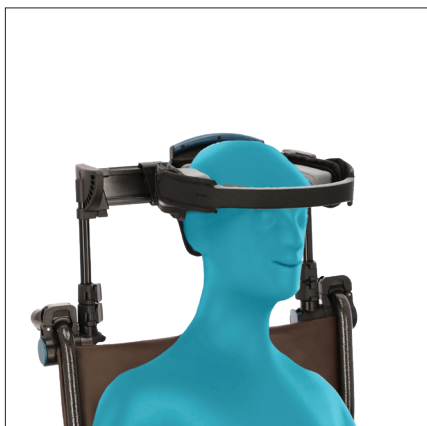

Package Contents

Each **HEADALOFT 360** package includes the following:

Item	Part	Function
Pre-Assembled Headrest Unit (1)		Includes: • 5 detachable machine washable support cushions • Telescopic poles easily expand and retract • Upper grip adapter to easily adjust for head height
Connectors (2)		Connects HEADALOFT 360 to the wheelchair*).
Diameter Adapters (2 sets)		Small adapters are included ranging from 1 mm to 5 mm that are inserted into the Connectors as needed to close any gap between the Connector and the wheelchair* frame. They are packaged in two sets and 1 Allen key.
Anterior Support Headbands (2)		Headbands easily attach to the Headrest to provide anterior support, preventing the user's head from falling forward. Includes: 2 sizes, machine washable.
Measuring Tape		Assists you in determining if you need to add any adapters to secure the Connectors to the push handles.

* Equally compatible with a walker, stander or other device that can be enhanced with a headrest.

Note:

When you first open the **HEADALOFT 360** package, you need to change the angle of the telescopic poles to 90 degrees to enable it to be inserted into the Connectors.

Safety Recommendations

When installing and using **HEADALOFT 360**, the following safety precautions should be taken:

- **Always consult with a physician, physical therapist, or other medical care providers before using this or any headrest system.**
- The use of the product is recommended as provided and with the recommendation of a professional. Any other use, including without the textile cushions is the sole responsibility of the user.
- Keep out of the reach of children during installation.
- Keep the plastic bags provided out of the reach of children – small parts are included in the product.
- It is recommended that you do not attach **HEADALOFT 360** to the wheelchair while the wheelchair is occupied. Minor adjustments to the tilt and symmetry can be made after **HEADALOFT 360** has been attached.
- Do not attempt to fold the wheelchair or disassemble **HEADALOFT 360** from the wheelchair while it is occupied.
- Verify that the Connectors have been locked after any adjustments have been made.
- Seek and follow medical instructions about how the wheelchair user is positioned and/or moved, how long the user is allowed to remain in the wheelchair, etc.
- When attaching the **HEADALOFT 360** to the wheelchair, make sure the base and correct combination of adapters are used to ensure a tight, non-slip connection between the headrest unit and the wheelchair.
- The adjustable head cushions should be washed regularly. If **HEADALOFT 360** is used by more than one user, the adjustable head cushions should be sanitized between different users.

Technical Support

Headovations, the developers of **HEADALOFT 360**, cares about our customers and users. If you experience any difficulties in using **HEADALOFT 360**, you are encouraged to contact us in one of the following ways:

- Through our local resellers and partners
- **Email: info@headovations.com**

You can also learn more about the **HEADALOFT 360** system by subscribing to our YouTube channel.

Attaching HEADALOFT 360 to the Wheelchair

HEADALOFT 360 enables almost all wheelchairs or similar devices that is suitable for a headrest to fully support the user's head at all angles and heights. Attaching **HEADALOFT 360** to any standard wheelchair takes only a few moments. Only one tool, the Allen key that is included in the **HEADALOFT 360** package, is required.

Overview of HEADALOFT 360 Assembly Process

Attaching **HEADALOFT 360** to a wheelchair includes the following steps:

The connectors:

- Add Diameter Adaptors to ensure a tight fit around the push handles of the wheelchair, as needed.
- Attach the connectors to the wheelchair.
- Tighten the screws on each push handle to ensure the connectors are securely fastened

The telescopic poles:

- After removing the headrest from the box, press the side buttons and change the angle of the telescopic poles to a 90-degree angle.
- Insert the telescopic poles of the headrest panel into the connectors.
- Make the final adjustments based on the needs of the user, including adjusting the height, tilt, symmetry, and lateral requirements.

Note:

Each of these steps is further explained below.

To learn more about adjusting **HEADALOFT 360** to the specific needs of the user using the wheelchair, see **Adjusting Options**.

Attaching the Connectors to the Wheelchair


Standard wheelchairs generally have push handles with diameters that range from 17 to 32 millimeters. **HEADALOFT 360** comes with a Base Adapter and individual Span Adaptors (measuring: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, and 5 mm).



These Span Adapters can be combined in any combination as needed to close the gap that occurs when the connectors are attached to the wheelchair push handles. For example, if the push handles are 24 mm in diameter, you can use the 1 mm, 4mm and 5mm. Adapters to close the gap and ensure a secure fit.

To attach the connectors:

Use the measuring tape to measure the circumference. The letter you see will be the diameter you need to reach when you add Adapters.

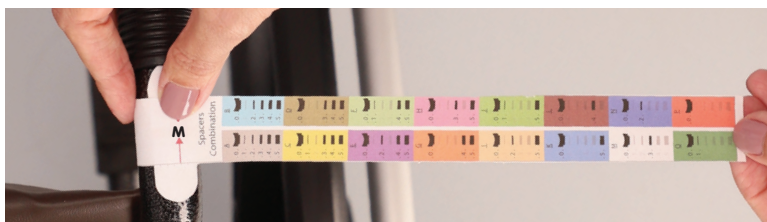

1. Insert the Base Adapter into the upper part of the Adapter and then add the appropriate Span Adapter or Adapters, as measured in the previous step. The Adapters fit securely into the upper part of the Connector.
2. Open the handle of one Connector and fit it around one of the wheelchair's push handles.
3. Close the top part of the Connector over the Base and Adapters and, using the Allen key provided in the **HEADALOFT 360** package, tighten the screw to secure the Connector to the push handle.
4. Repeat this same procedure, using Adapters from the second set provided in the **HEADALOFT 360** package for the second Connector on the other push handle.



IMPORTANT: Both connectors should be checked carefully to make sure they are securely fastened to the handle.

Note:

To calculate which Adapters to use, see the Appendix: Calculating which Adapters to Use.

Ideally, the connectors should be placed against the metal part of the wheelchair handles and not against the rubber protectors. However, if you feel the connectors offer more benefit in terms of security or appropriate positioning, you can secure the Connectors to the rubber handles.

Using the Allen key, it is recommended that you slightly tighten one screw, then attach and slightly tighten the second screw in place. Straighten the Connector and then securely tighten both screws.



Note:

Care should be taken to attach each of the connectors in the same relative location on each wheelchair handle.

Once the connectors are attached to the wheelchair, they can remain there, even while storing or transporting the wheelchair. You will only need to remove the connectors if you wish to disassemble and attach HEADALOFT 360 to a different wheelchair.

Adjusting and Inserting the Headrest through the Connectors

After the connectors, the next step is to expand the width of the **HEADALOFT 360** headrest by turning the blue control knob on the back of the headrest.

Normally, you only need to do this one time. Unless you need to fold or transport the wheelchair, you will not need to remove the headrest.

The position of the headrest should be adjusted according to the needs of the user and this is done after the unit is attached to the wheelchair.

The width of the **HEADALOFT 360** headrest is the only adjustment that needs to be made before mounting it. In the following sections, other adjustments, such as height and tilt, are described.



To adjust and attach the headrest to the wheelchair:

1. Adjust the width of the headrest by pulling the blue control knob out slightly and twisting to the right to increase the width of the headrest panel.	
2. If you have extended the headrest too far, you can turn the control knob to the left to decrease the width. The two sides will increase or decrease at the same time, keeping the distances on both sides symmetrical.	
3. Open the 2 blue side lockers on the connectors.	
4. Insert the support poles into the connectors and lock the headrest to the connector.	

Note:

The blue control knob must face the rear of the wheelchair and the cushions and headrest must face the front.

Adjusting Options

HEADALOFT 360 is fully customizable to meet the size, position, and needs of nearly every user. In general, while the width only needs to be adjusted once to fit it securely on the wheelchair, other adjustments may need to be made more often.

While many people prefer the head position centered for someone sitting straight,

HEADALOFT 360 offers great flexibility by enabling you to adjust for the tilt for someone who prefers or needs to lean forward and/or adjust for those who prefer or need to lean to either the left or right side while still having their head secured.

These adjustments can quickly and easily be made as frequently as they are needed, according to the status and preferences of each individual.

Note:

Before adjusting the headrest's height, tilt, or symmetry, it is recommended that you attach the appropriate Headband piece to the headrest.

Adjusting the Height

The first and most common adjustment that needs to be made is for the height of the **HEADALOFT 360** headrest in relation to the user's head. This can be approximated before the user is seated in the chair and then adjusted afterwards. In most cases, the height needs to be adjusted for each individual. In practice, this should be checked and adjusted as needed, even when the wheelchair's use is restricted to one user.

Note:

When adjusting the height of the headrest, it is very important to first release the plastic locks located on each telescopic pole.

To adjust the height:

1. Release first the upper lock and then the lower, as needed. Two locks are located on each pole. To unlock each, pull the lock into the open position. Opening both locks enables you to extend the telescopic poles to the maximum height



2. Once the poles are unlocked, use the handle at the top of the headrest to pull and raise the headrest to the desired height. Because the headrest was attached symmetrically, it will maintain the same level on both sides of the wheelchair as it is raised or lowered



3. When you have identified the optimal height for the user, close the lower lock and then the upper one securely. This will lock the Support Poles at the current position and keep the headrest in place.



4. If required, place the headband on the user's forehead and verify that this is the correct position. Beyond adjusting the height, you can also adjust both the tilt and the symmetry of the headrest. Note that if you change either the tilt or the symmetry, you may need to re-adjust the height.



Adjusting the Tilt

The tilt adjustment offers the ability to tilt the **HEADALOFT 360** 90 degrees forward or 30 degrees backward, to provide a 120-degree range of flexibility. This means that the **HEADALOFT 360** offers full flexibility, successfully ensuring that the user's head is secure and will not fall forward even while the user is physically leaning forward or even slightly backward. It is best to perform a preliminary adjustment before placing the user in the chair. But afterwards, the tilt should be adjusted to optimize the angle to maximize security and comfort. Adjusting the tilt angle may also improve the user's ability to interact with others in the area.

Note:

When adjusting the tilt, you will need to verify that the height is still adjusted properly. If the height needs to be adjusted, it is very important to first release upper plastic locks located on each Support Pole and then, as needed, release the lower one to further extend the Support Poles.

To adjust the tilt of the headrest:

1. Simultaneously press in and hold both blue buttons located on each of the connectors.	
2. While pressing the connector control buttons, use your thumbs to push the support poles forward. There are a wide variety of options allowing you to select how you want HEADALOFT 360 to control and adjust the angle of the user's body and head.	
3. When you find the angle that suits the user, gently move the support poles forward or back in either direction until you hear the connectors click in place and then release the blue connector control buttons.	
4. Once you have adjusted the tilt, you will likely have to adjust the headrest piece as well. This is accomplished by pressing and holding the buttons below the two wedges located on either side of the headrest.	
5. Adjust the angle of the head piece until it has been optimized for the user. There are 10 different settings, offering an almost completely flexible option for everyone.	
6. Once the adjustments have been made, place the headband against the user's forehead and verify that this is the correct position.	

Adjusting for Asymmetrical Use

A “non-symmetrical” position is when the user’s head is leaning to the left or right. Because someone may prefer to sit in a “non-symmetrical” position, the flexible HEADALOFT 360 offers the ability to adjust the position of the headrest in an asymmetrical position, such as closer to the left or right side of the wheelchair. In addition, this asymmetrical feature can also be combined with the Tilt adjustment, which is used when a user wants to lean forward. Both the tilt and the asymmetric adjustments may require you to verify and/or change the Height. It is important to remember to release the plastic locks (first the upper one and then the lower one) located on the Support Poles before making any adjustments.

Note: All adjustments can be used individually, in any combination, or all at the same time, for example, tilted and leaning to the left, and at any height.

After adjusting for the symmetrical or asymmetrical position of the head, you should again check that the height adjustment is still optimized for the user’s needs and make sure you lock the Support Poles securely.

To adjust for asymmetrical use

1. Press and hold the center of the blue control knob located on the back of the headrest.	
2. While pressing the button, gently move the headrest to the left or right, depending on where the user wishes to lean. Continue adjusting this until you have found the optimal position for the user.	
3. Release the inner button of the blue control knob. Make sure you hear a click, indicating that the headrest is locked in place.	
4. Place the headband over the user and verify that this is the correct position.	

Adjusting Lateral Positioning

To offer further flexibility to meet the needs of any individual, the side cushions can be adjusted in several ways to offer lateral support. Options include:

- **Adjusting the left, right, or both sides of the headrest to a fixed position:** This means that either or both sides are locked in the selected position and will firmly support the user's head.
- **Allowing flexibility on the left, right, or both sides of the headrest:** This means not locking either or both sides into a fixed position. While this does offer some support, either or both sides will move gently to allow the user's head to move more freely along a lateral alignment. Both side cushions (left and right) can be adjusted independently as the user prefers or as the caregiver decides. These can also be changed easily and often, while the user is seated in the chair. The lateral positioning is controlled by the two blue buttons on top of the headrest.

To adjust the lateral positioning

- **Lock one or both sides of the headrest to provide lateral headrest:** Press and hold the lateral adjust button down. This loosens the side of the headrest enabling you to adjust the angle. When you have found the correct angle, release the button, and the position becomes fixed and will not move.



- **Leaving the headrest lateral support flexible:** Press the lateral adjust button down. This will loosen the side of the headrest. While continuing to press down, rotate the button in a clockwise direction. Release the button and the headrest side will remain flexible.



Adjusting the Cushions

HEADALOFT 360 includes a modular arrangement of cushions that come attached to the headrest with Velcro. These can be removed and washed as often as needed and then easily returned. While there are recommended positions for the cushions, the fabric cover enables you to attach the cushions in whatever format best meets the needs of the individual.

For example, instead of the initial standard formation, you may choose to place two cushions on one side or remove cushions as needed. To disconnect a cushion, simply pull it away from the Velcro fabric covering the headrest. To reattach a cushion, simply press the back of the cushion firmly against the Velcro fabric cover.



Disconnecting HEADALOFT 360

To disconnect **HEADALOFT 360** from the wheelchair, simply unlock the Support Poles and remove the headrest. If you are doing this to transport the wheelchair to another location, which requires folding the wheelchair, you only need to disconnect the headrest. If you wish to completely remove **HEADALOFT 360**, for example, if you wish to attach it to a different wheelchair, you will need to remove both the headrest and the connectors.

Partially Disconnect HEADALOFT 360

To store or transport a wheelchair with **HEADALOFT 360** attached, simply remove the headrest. There is no reason to remove the connectors of the Support Poles, as these will easily fold into the wheelchair as it is collapsed for transport or storage.

To disconnect HEADALOFT 360 for storage or to be transported:

1. Release the Connector locks on both sides and pull the headrest up, out of the connectors.
2. After removing the headrest, make sure you close the connectors to ensure that they aren't damaged during transport.

For storage or transport, the wheelchair can now be folded according to the manufacturer's instructions.



Completely Disconnect HEADALOFT 360

If you wish to move HEADALOFT 360 to another wheelchair or any other mobility device (walker, stander, etc.), you will need to completely uninstall it, as detailed in the following steps.

To completely remove HEADALOFT 360 from a wheelchair:

1. Remove the headrest as detailed in the previous section.
2. Open the bridge connection on the Connector and, using the Allen key provided with **HEADALOFT 360**, loosen the screw.
3. Remove the Connector from the push handle of the wheelchair.
4. Collect the Adapters and place them in a container (or plastic bag) so that they can be used again in the future when the headrest is reconnected.
5. Repeat this with the second Connector.

Washing Instructions

You can remove the support cushions and launder them with the following restrictions:

- Water temperature should not be higher than 30° C/ 86° F on Gentle Cycle
- Do not machine dry.
- Do not spin in washing machine.
- Do not squeeze dry.

Though it is rarely necessary, you can remove and launder the fabric cover under the same conditions detailed above.

Appendix: Calculating what Adapters to Use

Each set of Diameter Adapters contains the following:

- Base Adapter
- 1 mm Adapter
- 2 mm Adapter
- 3 mm Adapter
- 4 mm Adapter
- 5 mm Adapter


Nearly every wheelchair in the world has a diameter of 17 to 32 millimeters (0.660 to 1.259 inches). Following are tables to help you calculate which Adapters you'll need to use.

Note that different combinations can be made. Included in the **HEADALOFT 360** packaging is a measuring tape with the recommended Adapter combinations.

The base Adapter is displayed as 0, as it is always inserted into the Connectors, even if you don't need to use any other Adapter.

Calculation in Centimeters

In the following table, the recommended Adapter combinations are displayed along with the corresponding Tape Letter that appears on the Adapter Combinations tape that is included with the **HEADALOFT 360**.



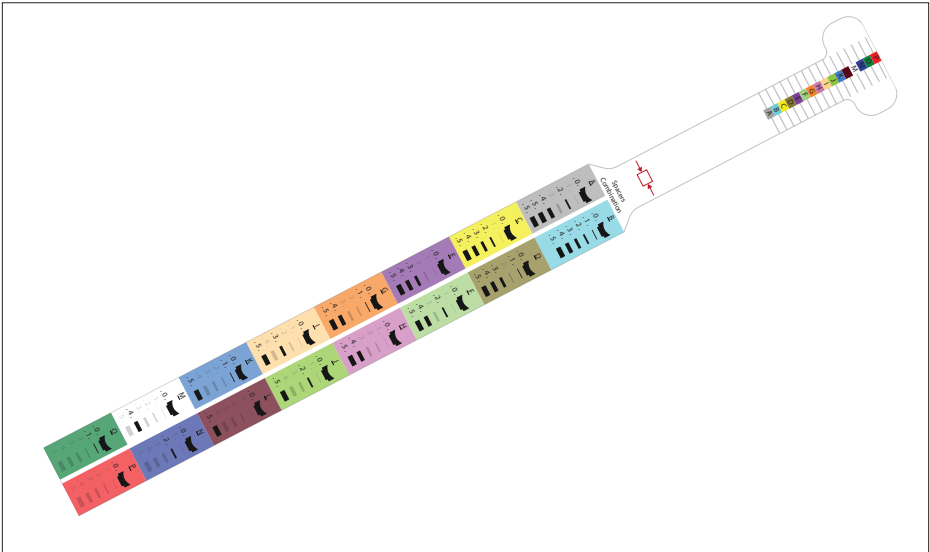


The following table gives an example of how the adapters can be combined to ensure a secure fit between the connectors and the push handles.

IMPORTANT:

Both connectors should be checked carefully to make sure they are securely fastened to the handle

Diameter (mm.)	Tape Letter	Base	1 mm.	2 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.
17	A	X		X		X	X.X
18	B	X	X	X	X	X	X
19	C	X		X	X	X	X
20	D	X	X		X	X	X
21	E	X			X	X	X
22	F	X		X		X	X
23	G	X	X			X	X
24	H	X				X	X
25	I	X			X		X
26	J	X		X			X
27	K	X	X				X
28	L	X					X
29	M	X				X	
30	N	X		X			
31	O	X	X				
32	p	X					

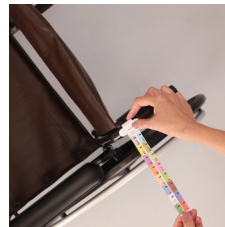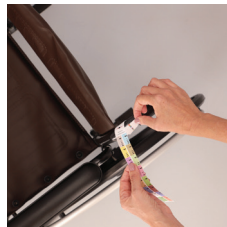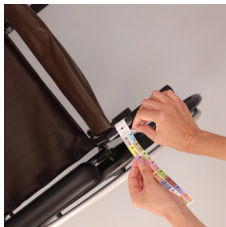

About the Company

Headovations was founded in 2014 by Ben Cohen Gazit. Dedicated to providing innovative headrest systems, the company's flagship product was designed to protect sleeping children whose heads are most vulnerable during car rides. The idea of protecting people's heads quickly morphed into a mission to provide better headrests for all who need it. **HEADALOFT 360** is designed to provide an optimal, flexible solution for anyone who uses a wheelchair regardless of age, size, or head positioning requirements.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	25
Packungsinhalt	27
Sicherheitsempfehlungen	28
Technischer Support	28
Anbringen von HEADALOFT 360 am Rollstuhl	29
Überblick über den HEADALOFT 360 Montageprozess	29
Anbringen der Verbinder am Rollstuhl	29
Einstellen und Einsetzen der Kopfstütze über die Verbinder	31
Anpassungsoptionen	34
Einstellen der Höhe	35
Einstellen der Neigung	36
Einstellen für asymmetrische Verwendung	38
Einstellen der seitlichen Positionierung	39
Einstellen der Kissen	40
Entfernen des HEADALOFT 360	41
Teilweises Entfernen des HEADALOFT 360	41
Vollständiges Entfernen des HEADALOFT 360	42
Waschanweisungen	42
Anhang: Berechnung der Adapter, die verwendet werden sollen	43
Berechnung in Zentimetern	43
Über das Unternehmen	44

Einführung


HEADALOFT 360 ist ein hochmodernes vollständiges Kopfstützensystem, das sicher an fast jedem Rollstuhl, Rollator, Stehänder oder an jedem anderen Gerät befestigt wird, das mit einer Kopfstütze ergänzt werden kann. Nach dem Aufsetzen hält **HEADALOFT 360** den Kopf des Benutzers auch über einen längeren Zeitraum in einer bequemen Position. In vielerlei Hinsicht kann es die Lebensqualität von Rollstuhlfahrern erheblich verbessern. Es bietet mehr Sicherheit und verhindert, dass der Kopf des Benutzers nach vorne fällt. Mit **HEADALOFT 360** können die Personen von Angesicht zu Angesicht mit ihren Mitmenschen kommunizieren und oft mehr Unabhängigkeit gewinnen, sich selbst ernähren, entspannen und fernsehen, bequem sitzen und sich mit ihrer Umgebung beschäftigen.

HEADALOFT 360 ist einfach zu montieren und kann an jedem Standard-Rollstuhl befestigt werden. Es ist ebenso einfach zu entfernen, Sie müssen nur die Kopfstütze abnehmen, um den Rollstuhl zur Aufbewahrung oder zum Transport zusammenklappen zu können. Was **HEADALOFT 360** einzigartig macht, ist nicht nur die einfache Installation, sondern auch die Flexibilität, die eine einfache Anpassung ermöglicht, unabhängig davon, ob der Benutzer gerade sitzt, sich nach vorne oder nach links oder rechts lehnt

Nachdem **HEADALOFT 360** am Rollstuhl befestigt wurde, kann es für jede Größe angepasst werden, unabhängig davon, ob es sich um ein Kind oder einen Erwachsenen handelt. Zusätzlich zur Anpassung der Breite an jeden Standard-Rollstuhl, können Sie auch die Höhe, die Neigung (nach vorne oder hinten), die Symmetrie (links oder rechts) und die Positionierung der Kopfkissen anpassen, um eine richtige, maßgeschneiderte Passform für jeden Benutzer zu gewährleisten.



HEADALOFT 360 kann auch auf einfache Weise an eine bestimmte Größe oder Position angepasst werden, an eine andere Person oder sogar an denselben Benutzer, der einfach die Position ändern möchte. Um **HEADALOFT 360** noch anpassbarer zu machen, werden zwei unterschiedlich große Bänder bereitgestellt, um eine sichere und bequeme Kopfstütze zu gewährleisten. Mit all diesen Anpassungsmöglichkeiten ist **HEADALOFT 360** ideal für jeden, von einem kleinen Kind bis zu einem Erwachsenen in voller Größe.

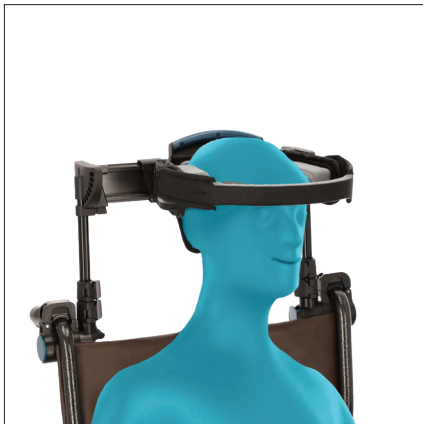

Packungsinhalt

Jedes **HEADALOFT 360** - Paket enthält Folgendes:

Artikel	Teil	Funktion
Vormontierte Kopfstützeinheit (1)		Enthält: • 5 abnehmbare, maschinenwaschbare Stützkissen • Teleskopstangen, die sich leicht aus- und einfahren lassen • Oberer Griffadapter zur einfachen Einstellung der Kopfhöhe
Verbinder (2)		Verbindet HEADALOFT 360 mit dem Rollstuhl*).
Durchmesser-Adapter (2 Sets)		Kleine Adapter im Bereich von 1 mm bis 5 mm sind im Lieferumfang enthalten, die bei Bedarf in die Steckverbinder eingesteckt werden, um jede Lücke zwischen dem Steckverbinder und dem Rahmen des Rollstuhls* zu schließen. Sie sind in zwei und 1 Innensechskantschlüssel verpackt.
Vordere Stützstirnbänder (2)		Die Stirnbänder lassen sich leicht an der Kopfstütze befestigen, um eine vordere Stütze zu bieten und um zu verhindern, dass der Kopf des Benutzers nach vorne fällt. Enthält: 2 Größen, maschinenwaschbar.
Maßband		Hilft Ihnen dabei festzulegen, ob Sie Adapter hinzufügen müssen, um die Verbinder an den Schiebegriffen zu befestigen.

Ebenso kompatibel mit einem Rollator, Stehständer oder einem anderen Gerät, das mit einer Kopfstütze ergänzt werden kann

inweis:

Wenn Sie das **HEADALOFT 360**-Paket zum ersten Mal öffnen, müssen Sie den Winkel der Teleskopstangen auf 90 Grad ändern, damit sie in die Steckverbinder eingeführt werden können.

Sicherheitsempfehlungen

Bei der Installation und Verwendung von **HEADALOFT 360** sollten die folgenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

- Wenden Sie sich stets an einen Arzt, Physiotherapeuten oder andere medizinische Dienstleister, bevor Sie dieses oder ein anderes Kopfstützensystem verwenden.
- Die Verwendung des Produkts findet wie vorgesehen und auf Empfehlung eines Fachmanns statt. Jede andere Verwendung, auch ohne die Textilkissen, liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.
- Während der Installation außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bewahren Sie die bereitgestellten Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf – es sind Kleinteile im Produkt enthalten.
- Es wird empfohlen, **HEADALOFT 360** nicht am Rollstuhl anzubringen, wenn der Rollstuhl gerade besetzt ist. Kleinere Anpassungen an der Neigung und Symmetrie können nach dem Anbringen von **HEADALOFT 360** vorgenommen werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, den Rollstuhl zusammenklappen oder **HEADALOFT 360** aus dem Rollstuhl auszubauen, während er besetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbinder nach allen Einstellungen verriegelt wurden.
- Suchen Sie nach und befolgen Sie die medizinischen Anweisungen, wie der Rollstuhlfahrer positioniert und/oder fortbewegt wird, wie lange er im Rollstuhl bleiben darf usw.
- Stellen Sie beim Anbringen des **HEADALOFT 360** am Rollstuhl sicher, dass die Basis und die richtige Kombination von Adaptern verwendet werden, um eine feste, rutschfeste Verbindung zwischen der Kopfstützeinheit und dem Rollstuhl zu gewährleisten.
- Die verstellbaren Kopfkissen sollten in regelmäßigen Zeitabständen gewaschen werden. Wenn **HEADALOFT 360** von mehr als einem Benutzer verwendet wird, sollten die verstellbaren Kopfkissen zwischen den einzelnen Benutzern desinfiziert werden.

Technischer Support

Headovations, die Entwickler von **HEADALOFT 360**, kümmern sich um unsere Kunden und Benutzer. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung von **HEADALOFT 360** haben, sollten Sie uns auf eine der folgenden Arten kontaktieren:

- Über unsere lokalen Fachhändler und Partner
- E-Mail: info@headovations.com

Sie können auch mehr über das **HEADALOFT 360**-System erfahren, indem Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren.

Anbringen von HEADALOFT 360 am Rollstuhl

HEADALOFT 360 ermöglicht es fast allen Rollstühlen oder ähnlichen Geräten, die für eine Kopfstütze geeignet sind, den Kopf des Benutzers in allen Winkeln und Höhen vollständig zu stützen. Das Anbringen

des **HEADALOFT 360** an jedem Standard-Rollstuhl dauert nur wenige Minuten. Es wird nur ein Werkzeug benötigt, der Innensechskantschlüssel, der im **HEADALOFT 360**-Paket enthalten ist.

Überblick über den HEADALOFT 360 Montageprozess

Das Anbringen des **HEADALOFT 360** an einem Rollstuhl umfasst folgende Schritte:

Die Verbinder:

- Fügen Sie bei Bedarf Durchmesser-Adapter hinzu, um einen festen Sitz um die Schiebegriffe des Rollstuhls zu gewährleisten.
- Befestigen Sie die Verbinder am Rollstuhl.
- Ziehen Sie die Schrauben an jedem Schiebegriff fest, um sicherzustellen, dass die Verbinder sicher befestigt sind

Die Teleskopstangen:

- Nachdem Sie die Kopfstütze aus der Box entfernt haben, drücken Sie die Seitentasten und ändern Sie den Winkel der Teleskopstangen in einen 90-Grad-Winkel.
- Stecken Sie die Teleskopstangen der Kopfstützenplatte in die Verbinder.
- Nehmen Sie die endgültigen Anpassungen basierend auf den Bedürfnissen des Benutzers vor, einschließlich der Anpassung der Höhe, Neigung, Symmetrie und der seitlichen Anforderungen.

Hinweis:

Jeder dieser Schritte wird nachfolgend näher erläutert.

Weitere Informationen zum Anpassen des **HEADALOFT 360** an die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers, der den Rollstuhl verwendet, finden Sie unter Anpassungsoptionen.

Anbringen der Verbinder am Rollstuhl


Standard-Rollstühle haben in der Regel Schiebegriffe mit Durchmessern im Bereich von 17 bis 32 Millimetern. HEADALOFT 360 wird mit einem Basisadapter und einzelnen Spannadaptern (Abmessungen: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm) geliefert.



iese Spannadapter können bei Bedarf beliebig kombiniert werden, um die Lücke zu schließen, die entsteht, wenn die Verbinder an den Schiebegriffen des Rollstuhls befestigt werden. Zum Beispiel: Wenn die Schiebegriffe einen Durchmesser von 24 mm haben, können Sie die 1 mm, 4mm - und 5 mm-Adapter verwenden, um die Lücke zu schließen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

So befestigen Sie die Verbinder:

Verwenden Sie das Maßband, um den Umfang zu messen. Der Buchstabe, den Sie sehen, ist der Durchmesser, den Sie erreichen müssen, wenn Sie Adapter hinzufügen.

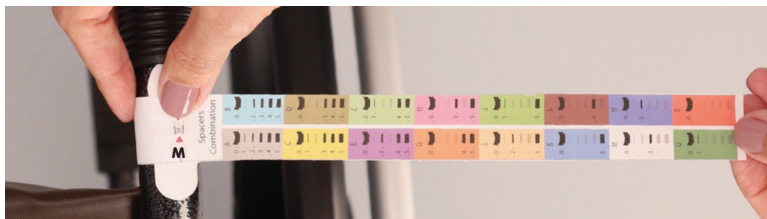

1. Stecken Sie den Basisadapter in den oberen Teil des Adapters und fügen Sie dann den oder die entsprechenden Spannadapter hinzu, wie im vorherigen Schritt gemessen. Die Adapter passen sicher in den oberen Teil des Steckers.
2. Öffnen Sie den Griff eines Verbinders und legen Sie ihn um einen der Schiebegriffe des Rollstuhls.
3. Schließen Sie den oberen Teil des Verbinders über der Basis und den Adaptern und ziehen Sie mit dem im **HEADALOFT 360**-Paket enthaltenen Innensechskantschlüssel die Schraube fest, um den Verbinders am Schiebegriff zu befestigen.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den Adaptern des zweiten Sets, die im **HEADALOFT 360**-Paket für den zweiten Verbinders am anderen Schiebegriff enthalten sind.



WICHTIG: Beide Verbinder sollten sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie sicher am Griff befestigt sind.

Hinweis:

Informationen zum Berechnen der zu verwendenden Adapter finden Sie im Anhang: Berechnung der Adapter, die verwendet werden sollen.

Idealerweise sollten die Verbinder am Metallteil der Rollstuhlgriffe und nicht an den Gummiprotektoren positioniert werden. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass die Verbinder einen größeren Vorteil in Bezug auf Sicherheit oder eine angemessene Positionierung bieten, können Sie sie an den Gummigriffen befestigen.

Mit dem Innensechskantschlüssel wird empfohlen, eine Schraube leicht anzuziehen, dann die zweite Schraube anzubringen und diese leicht anzuziehen. Richten Sie den Verbinder aus und ziehen Sie dann beide Schrauben fest an.



Hinweis:

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Verbindungsstücke an jedem Rollstuhlgriff an der gleichen Stelle angebracht werden.

Sobald die Verbinder am Rollstuhl befestigt sind, können sie dort verbleiben, auch während der Lagerung oder des Transports des Rollstuhls. Sie müssen die Verbinder nur entfernen, wenn Sie **HEADALOFT 360** demontieren und an einem anderen Rollstuhl anbringen möchten.

Einstellen und Einsetzen der Kopfstütze über die Verbinder

Nach den Verbindern ist der nächste Schritt, die Breite der Kopfstütze des **HEADALOFT 360** zu erweitern, indem Sie den blauen Drehknopf an der Rückseite der Kopfstütze drehen.

Normalerweise müssen Sie dies nur einmal tun. Wenn Sie den Rollstuhl nicht zusammenklappen oder transportieren müssen, müssen Sie auch die Kopfstütze nicht entfernen.

Die Position der Kopfstütze sollte an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden, nachdem die Einheit am Rollstuhl befestigt wurde.

Die Breite der HEADALOFT 360 -Kopfstütze ist die einzige Einstellung, die vor der Montage vorgenommen werden muss. In den folgenden Abschnitten werden weitere Einstellungen wie Höhe und Neigung beschrieben.



So stellen Sie die Kopfstütze ein und befestigen sie am Rollstuhl:

1. Stellen Sie die Breite der Kopfstütze ein, indem Sie den blauen Drehknopf leicht herausziehen und nach rechts drehen, um die Breite der Kopfstützenplatte zu vergrößern.	
2. Wenn Sie die Kopfstütze zu weit ausgefahren haben, können Sie den Drehknopf nach links drehen, um die Breite zu verringern. Die beiden Seiten werden gleichzeitig zunehmen oder abnehmen, wodurch die Abstände auf beiden Seiten symmetrisch gehalten werden.	
4. Öffnen Sie die 2 blauen seitlichen Verschlüsse an den Verbindern.	
5. Stecken Sie die Stützstangen in die Verbinder und verriegeln Sie die Kopfstütze mit dem Verbinder.	

Hinweis:

Der blaue Drehknopf muss zur Rückseite des Rollstuhls und der Kissen und die Kopfstütze nach vorne gerichtet sein.

Anpassungsoptionen

HEADALOFT 360 ist vollständig anpassbar, um die Größe, Position und Bedürfnisse von fast jedem Benutzer zu erfüllen. Im Allgemeinen muss die Breite nur einmal angepasst werden, um es sicher am Rollstuhl zu befestigen, möglicherweise müssen jedoch andere Einstellungen häufiger vorgenommen werden.

Während viele eine zentrierte Kopfposition für Personen bevorzugen, die gerade sitzen, bietet **HEADALOFT 360** große Flexibilität, indem es Ihnen ermöglicht, die Neigung für jemanden einzustellen, der sich nach vorne lehnen möchte oder muss, und/oder die Neigung für diejenigen einzustellen, die sich entweder nach links oder rechts lehnen möchten oder müssen, während ihr Kopf immer noch gesichert ist.

Diese Anpassungen können schnell und einfach so oft wie erforderlich vorgenommen werden, je nach Status und Vorlieben eines jeden Einzelnen.

Hinweis:

Bevor Sie die Höhe, Neigung oder Symmetrie der Kopfstütze einstellen, wird empfohlen, das entsprechende Stirnbandstück an der Kopfstütze zu befestigen.

Einstellen der Höhe

Die erste und häufigste Einstellung, die vorgenommen werden muss, ist die Höhe der HEADALOFT 360-Kopfstütze im Verhältnis zum Kopf des Benutzers. Diese kann eingeschätzt werden, bevor der Benutzer auf dem Stuhl sitzt, und anschließend eingestellt werden. In den meisten Fällen muss die Höhe individuell angepasst werden. In der Praxis sollte dies überprüft und bei Bedarf angepasst werden, auch wenn die Nutzung des Rollstuhls auf einen Benutzer beschränkt ist.

Hinweis:

Bei der Höhenverstellung der Kopfstütze ist es sehr wichtig, zuerst die Kunststoffverriegelungen an jeder Teleskopstange zu lösen.

Einstellen der Höhe:

1. Lösen Sie bei Bedarf zuerst die obere und dann die untere Verriegelung. An jeder Stange befinden sich zwei Verriegelungen. Ziehen Sie zum Entsperren die Verriegelung in die geöffnete Position. Durch Öffnen beider Verriegelungen können Sie die Teleskopstangen auf die maximale Höhe ausfahren	
2. Sobald die Stangen entriegelt sind, verwenden Sie den Griff an der Oberseite der Kopfstütze, um die Kopfstütze auf die gewünschte Höhe zu ziehen und anzuheben. Da die Kopfstütze symmetrisch angebracht wurde, bleibt sie auf beiden Seiten des Rollstuhls auf demselben Niveau, da sie angehoben oder abgesenkt wird	
3. Wenn Sie die optimale Höhe für den Benutzer festgelegt haben, schließen Sie die untere Verriegelung und dann die obere auf sichere Weise. Dadurch werden die Stützstangen in der aktuellen Position gesperrt und die Kopfstütze an Ort und Stelle gehalten.	
4. Falls erforderlich, legen Sie das Stirnband auf die Stirn des Benutzers und vergewissern Sie sich, dass dies die richtige Position ist. Neben der Höhenverstellung können Sie auch die Neigung und die Symmetrie der Kopfstütze einstellen. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise die Höhe neu einstellen müssen, wenn Sie die Neigung oder die Symmetrie abändern.	

Einstellen der Neigung

Die Neigungsverstellung bietet die Möglichkeit, den HEADALOFT 360 um 90 Grad nach vorne oder um 30 Grad nach hinten zu neigen, um einen 120 Grad-Flexibilitätsbereich zu bieten. Dies bedeutet, dass der HEADALOFT 360 volle Flexibilität bietet, um sicherzustellen, dass der Kopf des Benutzers gesichert ist und nicht nach vorne fällt, auch wenn sich der Benutzer räumlich nach vorne oder sogar leicht nach hinten gelehnt hat. Am besten führen Sie eine Voreinstellung durch, bevor Sie den Benutzer auf den Stuhl setzen. Aber danach sollte die Neigung angepasst werden, um den Winkel zu optimieren und die Sicherheit und den Komfort zu maximieren. Das Einstellen des Neigungswinkels kann auch die Fähigkeit des Benutzers verbessern, mit anderen in dem Bereich zu kommunizieren.

Hinweis:

Beim Einstellen der Neigung müssen Sie überprüfen, ob die Höhe noch richtig eingestellt ist. Wenn die Höhe angepasst werden muss, ist es sehr wichtig, zuerst die oberen Kunststoffverriegelungen an jeder Stützstange zu lösen und dann bei Bedarf die untere zu lösen, um die Stützstangen weiter zu verlängern.

Einstellen der Neigung der Kopfstütze:

1. Drücken Sie gleichzeitig beide blauen Tasten an jedem der Anschlüsse und halten Sie sie gedrückt.	
2. Drücken Sie die Bedientasten des Verbinders und schieben Sie die Stützstangen mit den Daumen nach vorne. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, mit denen Sie auswählen können, wie Sie den HEADALOFT 360 steuern und den Winkel des Körpers und des Kopfes des Benutzers einstellen möchten.	
3. Wenn Sie den Winkel finden, der dem Benutzer entspricht, bewegen Sie die Stützstangen vorsichtig nach vorne oder nach hinten in beide Richtungen, bis Sie hören, dass die Verbinder einrasten, und lassen Sie dann die blauen Bedientasten des Verbinders los.	
4. Sobald Sie die Neigung eingestellt haben, müssen Sie wahrscheinlich auch das Kopfstützenelement einstellen. Dies wird erreicht, indem die Knöpfe unter den beiden Keilen gedrückt und gehalten werden, diese befinden sich auf beiden Seiten der Kopfstütze.	
5. Stellen Sie den Winkel des Kopfstücks ein, bis es für den Benutzer optimiert wurde. Es gibt 10 verschiedene Einstellungen, die eine praktisch vollkommen flexible Option für jeden bieten.	
6. Sobald die Einstellungen vorgenommen wurden, legen Sie das Stirnband gegen die Stirn des Benutzers und vergewissern Sie sich, dass dies die richtige Position ist.	

Einstellen für asymmetrische Verwendung

Eine „nicht symmetrische“ Position liegt vor, wenn der Kopf des Benutzers nach links oder rechts geneigt ist. Da es mancher eventuell bevorzugt in einer „nicht symmetrischen“ Position zu sitzen, bietet der flexible **HEADALOFT 360** die Möglichkeit, die Position der Kopfstütze in einer asymmetrischen Position einzustellen, z. B. näher an der linken oder rechten Seite des Rollstuhls.

Darüber hinaus kann dieses asymmetrische Merkmal auch mit der Neigungsverstellung kombiniert werden, die verwendet wird, wenn sich ein Benutzer nach vorne lehnen möchte. Sowohl die Neigungs- als auch die asymmetrischen Einstellungen erfordern möglicherweise eine Überprüfung und/oder Änderung der Höhe. Es ist wichtig, daran zu denken, die Kunststoffverriegelungen (zuerst die obere und dann die untere) an den Stützstangen zu lösen, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen.

Hinweis: Alle Einstellungen können einzeln, in jeder Kombination oder alle gleichzeitig verwendet werden, z. B. geneigt und nach links lehnd und in jeder Höhe.

Nachdem Sie die symmetrische oder asymmetrische Position des Kopfes eingestellt haben, sollten Sie erneut überprüfen, ob die Höheneinstellung noch für die Bedürfnisse des Benutzers optimiert ist, und sicherstellen, dass Sie die Stützstangen sicher verriegeln.

So stellen Sie die asymmetrische Verwendung ein

1. Halten Sie die Mitte des blauen Drehknopfs an der Rückseite der Kopfstütze gedrückt.	
2. Während Sie die Taste drücken, bewegen Sie die Kopfstütze vorsichtig nach links oder rechts, je nachdem, wo sich der Benutzer anlehnen möchte. Stellen Sie dies weiter ein, bis Sie die optimale Position für den Benutzer gefunden haben.	
3. Lassen Sie die innere Taste des blauen Drehknopfs los. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Klicken hören, das anzeigt, dass die Kopfstütze eingearbeitet ist.	
4. Legen Sie das Stirnband auf die Stirn des Benutzers und vergewissern Sie sich, dass es sich um die richtige Position handelt.	

Einstellen der seitlichen Positionierung

Um weitere Flexibilität zu bieten und um den Bedürfnissen eines jeden Einzelnen gerecht zu werden, können die Seitenkissen auf verschiedene Weise verstellt werden, um seitlichen Halt zu bieten. Die Optionen beinhalten:

- Einstellen der linken, rechten oder beider Seiten der Kopfstütze in fester Position: Dies bedeutet, dass eine oder beide Seiten in der ausgewählten Position verriegelt sind und den Kopf des Benutzers fest stützen.
- Ermöglichen der Flexibilität auf der linken, rechten oder auf beiden Seiten der Kopfstütze: Dies bedeutet, dass weder eine noch beide Seiten in einer festen Position verriegelt werden. Dies bietet zwar eine gewisse Stütze, aber eine oder beide Seiten bewegen sich sanft, damit sich der Kopf des Benutzers entlang einer seitlichen Ausrichtung freier bewegen kann.

Beide Seitenkissen (links und rechts) können unabhängig voneinander eingestellt werden, wie es der Benutzer bevorzugt oder die Pflegeperson entscheidet. Diese können auch leicht und häufig gewechselt werden, während der Benutzer auf dem Stuhl sitzt. Die seitliche Positionierung wird durch die beiden blauen Knöpfe an der Oberseite der Kopfstütze gesteuert.

Einstellen der seitlichen Position

- Verriegeln Sie eine oder beide Seiten der Kopfstütze, um eine seitliche Kopfstütze bereitzustellen: Drücken und halten Sie den Seiteneinstellknopf. Dadurch wird die Seite der Kopfstütze gelockert, sodass Sie den Winkel einstellen können. Wenn Sie den richtigen Winkel gefunden haben, lassen Sie den Knopf los, die Position wird fixiert und bewegt sich nicht.



- Lassen Sie die Seitenstütze der Kopfstütze flexibel: Drücken Sie den Seiteneinstellknopf nach unten. Dadurch wird die Seite der Kopfstütze gelockert. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, während Sie ihn weiter nach unten drücken. Lassen Sie den Knopf los, verbleibt die Kopfstützenseite flexibel.



Einstellen der Kissen

HEADALOFT 360 umfasst eine modulare Anordnung von Kissen, die mit einem Klettverschluss an der Kopfstütze befestigt werden. Diese können so oft wie erforderlich entfernt, gewaschen und dann leicht erneut angebracht werden. Während es empfohlene Positionen für die Kissen gibt, ermöglicht der Stoffbezug, die Kissen in dem Format zu befestigen, das den Bedürfnissen des Einzelnen am besten entspricht.

Zum Beispiel können Sie anstelle der ursprünglichen Standardposition zwei Kissen auf eine Seite legen oder die Kissen bei Bedarf entfernen. Um ein Kissen zu entfernen, ziehen Sie es einfach vom Klettband ab, das die Kopfstütze bedeckt. Um ein Kissen wieder anzubringen, drücken Sie einfach die Rückseite des Kissens fest gegen den Klettstoffbezug.



Entfernen des HEADALOFT 360

Um den **HEADALOFT 360** vom Rollstuhl zu entfernen, entriegeln Sie einfach die Stützstangen und entfernen Sie die Kopfstütze. Wenn Sie den Rollstuhl an einen anderen Ort transportieren, wofür Sie den Rollstuhl zusammenklappen müssen, müssen Sie ausschließlich die Kopfstütze abtrennen. Wenn Sie das **HEADALOFT 360** vollständig entfernen möchten, wenn Sie es beispielsweise an einem anderen Rollstuhl anbringen wollen, müssen Sie sowohl die Kopfstütze als auch die Verbinder entfernen.

Teilweises Entfernen des HEADALOFT 360

Um einen Rollstuhl mit befestigtem **HEADALOFT 360** zu lagern oder zu transportieren, entfernen Sie einfach die Kopfstütze. Es gibt keinen Grund, die Verbinder der Stützstangen zu entfernen, da diese leicht in den Rollstuhl eingeklappt werden können, da er zum Transport oder zur Lagerung zusammengeklappt wird.

So entfernen Sie den HEADALOFT 360 zur Lagerung oder zum Transport:

1. Lösen Sie die Verbinderverriegelungen auf beiden Seiten und ziehen Sie die Kopfstütze nach oben aus den Verbindern..
2. Nachdem Sie die Kopfstütze entfernt haben, vergewissern Sie sich, dass Sie die Verbinder schließen, um sicherzustellen, dass sie während des Transports nicht beschädigt werden..



Vollständiges Entfernen des HEADALOFT 360

Wenn Sie **HEADALOFT 360** auf einem anderen Rollstuhl oder einem anderen Mobilitätsgerät (Rollator, Stehständer usw.) anbringen möchten, müssen Sie es vollständig deinstallieren, wie in den folgenden Schritten beschrieben.

So entfernen Sie HEADALOFT 360 vollständig aus einem Rollstuhl:

1. Entfernen Sie die Kopfstütze wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
2. Öffnen Sie die Brückenverbindung am Verbinder und verwenden Sie den Innensechskantschlüssel mit dem **HEADALOFT 360** geliefert wurde, lösen Sie die Schraube.
3. Entfernen Sie den Verbinder vom Schiebegriff des Rollstuhls.
4. Sammeln Sie die Adapter und legen Sie sie in einen Behälter (oder in eine Plastiktüte), damit sie in Zukunft wieder verwendet werden können, wenn die Kopfstütze wieder angebracht wird.
5. Wiederholen Sie dies mit dem zweiten Verbinder.

Waschanweisungen

Sie können die Stützkissen entfernen und mit den folgenden Einschränkungen waschen:

- Die Wassertemperatur sollte bei sanftem Zyklus nicht höher als 30 °C/ 86 °F sein
- Nicht im Wäschetrockner trocknen.
- Nicht in der Waschmaschine schleudern.
- Nicht trocken drücken.

Obwohl dies selten erforderlich ist, können Sie den Stoffbezug unter den gleichen Bedingungen wie oben beschrieben entfernen und waschen.

Anhang: Berechnung der Adapter, die verwendet werden sollen

Jedes Set von Durchmesser-Adaptoren enthält Folgendes:

- Basisadapter
- 1 mm-Adapter
- 2 mm-Adapter
- 3 mm-Adapter
- 4 mm-Adapter
- 5 mm-Adapter


Fast jeder Rollstuhl der Welt hat einen Durchmesser von 17 bis 32 Millimetern (0,660 bis 1,259 Zoll). Nachfolgend finden Sie Tabellen, die Ihnen bei der Berechnung der Adapter helfen, die Sie verwenden müssen.

Beachten Sie, dass verschiedene Kombinationen möglich sind. Im **HEADALOFT 360** enthalten In der Verpackung ist ein Maßband mit den empfohlenen Adapterkombinationen.

Der Basisadapter wird als 0 angezeigt, da er immer in die Verbinder eingesteckt wird, auch wenn Sie keinen anderen Adapter verwenden müssen.

Berechnung in Zentimetern

In the following table, the recommended Adapter combinations are displayed along with the corresponding Tape Letter that appears on the Adapter Combinations tape that is included with the **HEADALOFT 360**.

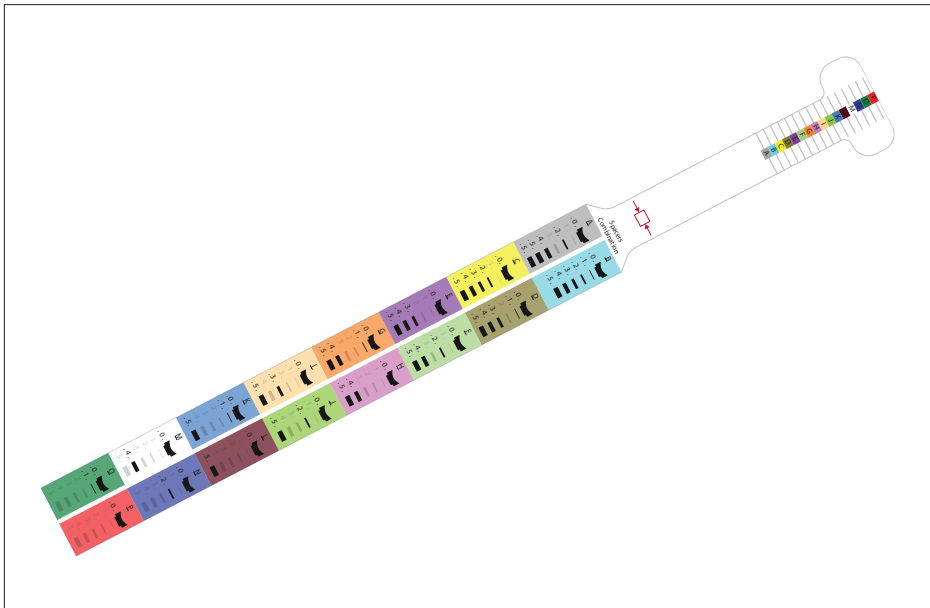


Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel dafür, wie die Adapter kombiniert werden können, um einen sicheren Sitz zwischen den Verbindern und den Schiebegriffen zu gewährleisten.

WICHTIG:

Beide Verbinder sollten sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie sicher am Griff befestigt sind

Durchmesser (mm)	Bandbuchstabe	Basis	1 mm.	2 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.
17	A	X		X		X	X.X
18	B	X	X	X	X	X	X
19	C	X		X	X	X	X
20	D	X	X		X	X	X
21	E	X			X	X	X
22	F	X		X		X	X
23	G	X	X			X	X
24	H	X				X	X
25	I	X			X		X
26	J	X		X			X
27	K	X	X				X
28	L	X					X
29	M	X				X	
30	N	X		X			
31	O	X	X				
32	p	X					

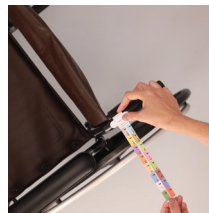

Über das Unternehmen

Headovations wurde im Jahr 2014 von Ben Cohen Gazit gegründet. Das Flaggschiff des Unternehmens, das innovative Kopfstützensysteme anbietet, wurde entwickelt, um schlafende Kinder zu schützen, deren Köpfe während Autofahrten am verwundbarsten sind. Die Idee, die Köpfe der Menschen zu schützen, verwandelte sich schnell in eine Mission, um allen, die es brauchen, bessere Kopfstützen zu bieten. **HEADALOFT 360** wurde entwickelt, um eine optimale, flexible Lösung zur Verfügung zu stellen. solution for anyone who uses a wheelchair regardless of age, size, or head positioning requirements.

ES

Índice


Introducción	46
Contenido del paquete	48
Recomendaciones de seguridad	49
Asistencia técnica	49
Fijación de HEADALOFT 360 a la silla de ruedas	50
Visión general del proceso de montaje de HEADALOFT 360	50
Fijación de los conectores a la silla de ruedas	50
Ajuste e inserción del reposacabezas a través de los conectores	52
Opciones de ajuste	55
Ajuste de la altura	55
Ajuste de la inclinación	57
Ajuste para un uso asimétrico	59
Ajuste del posicionamiento lateral	60
Ajuste de los cojines	61
Desconectar HEADALOFT 360	62
Desconectar parcialmente HEADALOFT 360	62
Desconectar completamente HEADALOFT 360	63
Instrucciones de lavado	63
Anexo: Saber qué adaptadores utilizar	64
Cálculo en centímetros	64
Acerca de la empresa	65

Introducción

HEADALOFT 360 es un sistema de reposacabezas completo de última generación que se acopla de forma segura a casi cualquier silla de ruedas, andador, bipedestador u otro dispositivo que pueda mejorarse con un reposacabezas. Una vez colocado, **HEADALOFT 360** mantiene suavemente la cabeza del usuario en una posición cómoda, incluso durante largos periodos de tiempo. En muchos sentidos, puede mejorar enormemente la calidad de vida de cualquier persona que utilice una silla de ruedas. Proporciona mayor seguridad e impide que la cabeza del usuario caiga hacia delante. Con **HEADALOFT 360**, las personas pueden comunicarse cara a cara con quienes les rodean y, a menudo, ganar más independencia, alimentarse por sí mismas, relajarse y ver la televisión, y sentarse cómodamente y relacionarse con su entorno.

HEADALOFT 360 es fácil de montar y se puede acoplar a cualquier silla de ruedas estándar. Es igualmente fácil de desmontar, y solo hay que separar el reposacabezas para plegar la silla de ruedas para guardarla o transportarla. Lo que hace único a **HEADALOFT 360** no es solo la facilidad con la que se instala, sino la flexibilidad que permite ajustarlo fácilmente independientemente de si el usuario está sentado recto, inclinado hacia delante, o hacia la izquierda o la derecha.

Una vez acoplado el **HEADALOFT 360** a la silla de ruedas, puede ajustarse a cualquier tamaño, ya sea un niño o un adulto. Además de ajustar la anchura para adaptarse a cualquier silla de ruedas estándar, también puede ajustar la altura, la inclinación (hacia delante o hacia atrás), la simetría (izquierda o derecha) y la colocación de los reposacabezas para garantizar un ajuste adecuado y personalizado para cualquier usuario.

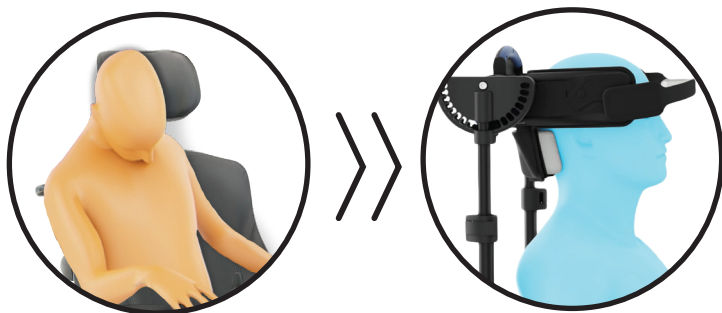

**CABEZA
ABAJO**

**CABEZA
ARRIBA**

Con la misma facilidad con la que se ajusta para cualquier talla o posición específicas, **HEADALOFT 360** también puede reajustarse fácilmente para otra persona, o incluso para el mismo usuario que simplemente desee cambiar de posición. Para hacer que **HEADALOFT 360** sea aún más personalizable, se proporcionan dos bandas de diferentes tamaños para garantizar un reposacabezas seguro y cómodo. Con todas estas posibilidades de ajuste, **HEADALOFT 360** es ideal para cualquier persona, desde un niño pequeño hasta un adulto de talla grande.



Contenido del paquete

Cada paquete de **HEADALOFT 360** incluye lo siguiente:

Artículo	Pieza	Función
Unidad de reposacabezas premontada (1)		Incluye: • 5 cojines de apoyo desmontables y lavables a máquina • Las pértigas telescópicas se expanden y retraen fácilmente • Adaptador de empuñadura superior para ajustar fácilmente la altura de la cabeza
Conectores (2)		Conecta HEADALOFT 360 a la silla de ruedas*).
Adaptadores de diámetro (2 juegos)		Se incluyen pequeños adaptadores de entre 1 mm y 5 mm que se insertan en los conectores según sea necesario para cerrar cualquier hueco entre el conector y el armazón de la silla de ruedas*. Se presentan en dos juegos y 1 llave Allen.
Cintas de sujeción anterior (2)		Las cintas para la cabeza se acoplan fácilmente al reposacabezas para proporcionar apoyo anterior, lo que evita que la cabeza del usuario caiga hacia delante. Incluye: 2 tallas, lavable a máquina.
Cinta métrica		Le ayuda a determinar si necesita añadir algún adaptador para fijar los conectores a las empuñaduras.

* Igualmente compatible con un andador, bipedestador u otro dispositivo que pueda mejorarse con un reposacabezas.

Nota:

Cuando abra el paquete HEADALOFT 360 por primera vez, deberá cambiar el ángulo de las pértigas telescópicas a 90 grados para poder insertarlas en los Conectores.

Recomendaciones de seguridad

Al instalar y utilizar **HEADALOFT 360**, deben tomarse las siguientes precauciones de seguridad:

- Consulte siempre a un médico, fisioterapeuta u otro profesional sanitario antes de utilizar este o cualquier otro sistema de reposacabezas.
- Se recomienda utilizar el producto tal como se suministra y con la recomendación de un profesional. Cualquier otro uso, incluso sin los cojines textiles, es responsabilidad exclusiva del usuario.
- Mantener fuera del alcance de los niños durante la instalación.
- Mantenga las bolsas de plástico suministradas fuera del alcance de los niños, ya que el producto contiene piezas pequeñas.
- Se recomienda no fijar **HEADALOFT 360** a la silla de ruedas mientras esta esté ocupada. Se pueden realizar pequeños ajustes en la inclinación y la simetría después de colocar **HEADALOFT 360**.
- No intente plegar la silla de ruedas ni desmontar el **HEADALOFT 360** de la silla de ruedas mientras esté ocupada.
- Compruebe que los conectores se han bloqueado después de realizar cualquier ajuste.
- Acuda al médico y siga sus instrucciones sobre cómo colocar y/o mover al usuario de la silla de ruedas, cuánto tiempo puede permanecer en ella, etc.
- Al fijar **HEADALOFT 360** a la silla de ruedas, asegúrese de utilizar la base y la combinación correcta de adaptadores para garantizar una conexión firme y antideslizante entre la unidad de reposacabezas y la silla de ruedas.
- Los cojines ajustables para la cabeza deben lavarse con regularidad. Si **HEADALOFT 360** es utilizado por más de un usuario, los cojines ajustables de la cabeza deben ser higienizados entre los diferentes usuarios.

Asistencia técnica

Headovations, los desarrolladores de **HEADALOFT 360**, nos preocupamos por nuestros clientes y usuarios. Si experimenta alguna dificultad en el uso de **HEADALOFT 360**, le animamos a ponerse en contacto con nosotros de una de las siguientes maneras.

- A través de nuestros distribuidores y socios locales
- Correo: info@headovations.com

También puede obtener más información sobre el sistema **HEADALOFT 360** suscribiéndose a nuestro canal de YouTube.

Fijación de HEADALOFT 360 a la silla de ruedas

HEADALOFT 360 permite que casi todas las sillas de ruedas o dispositivos similares aptos para reposacabezas sujeten completamente la cabeza del usuario en todos los ángulos y alturas. Fijar

HEADALOFT 360 a cualquier silla de ruedas estándar solo lleva unos instantes. Solo se necesita una herramienta, la llave Allen que se incluye en el paquete **HEADALOFT 360**.

Visión general del proceso de montaje de HEADALOFT 360

Para fijar **HEADALOFT 360** a una silla de ruedas, siga estos pasos:

Los conectores:

Añada adaptadores de diámetro para asegurar un ajuste apretado alrededor de las empuñaduras de la silla de ruedas, según sea necesario.

- Fije los conectores a la silla de ruedas.
- Apriete los tornillos de cada empuñadura para asegurarse de que los conectores están bien fijados.

Las pértigas telescópicas:

- Después de sacar el reposacabezas de la caja, pulse los botones laterales y cambie el ángulo de las pértigas telescópicas a un ángulo de 90 grados.
- Introduzca las pértigas telescópicas del panel del reposacabezas en los conectores.
- Realice los ajustes finales en función de las necesidades del usuario, incluido el ajuste de la altura, la inclinación, la simetría y los requisitos laterales.

Nota:

Cada uno de estos pasos se explica con más detalle a continuación.

Para saber más sobre cómo ajustar **HEADALOFT 360** a las necesidades específicas del usuario que utiliza la silla de ruedas, consulte Opciones de ajuste.

Fijar los conectores a la silla de ruedas


Las sillas de ruedas estándar suelen tener empuñaduras con diámetros que oscilan entre 17 y 32 milímetros. **HEADALOFT 360** viene con un adaptador base y cinco adaptadores Span individuales (medidas: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm).



Estos adaptadores Span pueden combinarse según sea necesario para cerrar el hueco que se produce cuando los conectores se acoplan a las empuñaduras de la silla de ruedas. Por ejemplo, si las empuñaduras tienen 24 mm de diámetro, puede utilizar los adaptadores de 1 mm, 4mm y 5 mm para cerrar el hueco y garantizar un ajuste seguro.

Para fijar los conectores:

Utilice la cinta métrica para medir la circunferencia. La letra que vea será el diámetro que deberá alcanzar cuando añada adaptadores.

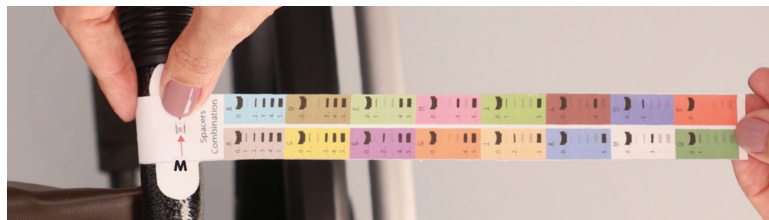

1. Inserte el adaptador base en la parte superior del adaptador y, a continuación, añada el adaptador o adaptadores de extensión adecuados, según las medidas indicadas en el paso anterior. Los adaptadores encajan firmemente en la parte superior del conector.
2. Abra el asa de un conector y colóquelo alrededor de una de las empuñaduras de la silla de ruedas.
3. Cierre la parte superior del conector sobre la base y los adaptadores y, utilizando la llave Allen incluida en el paquete de **HEADALOFT 360**, apriete el tornillo para fijar el conector a la empuñadura.
4. Repita este mismo procedimiento, utilizando los adaptadores del segundo conjunto proporcionado en el paquete **HEADALOFT 360** para el segundo conector en la otra empuñadura.



IMPORTANTE: Ambos conectores deben comprobarse con detenimiento para asegurarse de que están bien sujetos al asa.

Nota:

Para calcular qué adaptadores utilizar, consulte el anexo: **Saber qué adaptadores utilizar.**

Lo ideal es colocar los conectores contra la parte metálica de las empuñaduras de la silla de ruedas y no contra los protectores de goma. Sin embargo, si considera que los conectores ofrecen más ventajas en términos de seguridad o de posicionamiento adecuado, puede fijar los conectores a las asas de goma.

Con la llave Allen, se recomienda apretar ligeramente un tornillo y, a continuación, colocar y apretar ligeramente el segundo tornillo en su sitio. Enderezca el conector y, a continuación, apriete firmemente ambos tornillos.



Nota:

Se debe tener cuidado de fijar cada uno de los conectores en la misma ubicación relativa en cada empuñadura de la silla de ruedas.

Una vez que los conectores están fijados a la silla de ruedas, pueden permanecer allí, incluso mientras se guarda o transporta la silla. Solo tendrá que retirar los conectores si desea desmontar y acoplar **HEADALOFT 360** a una silla de ruedas diferente.

Ajustar e insertar el reposacabezas a través de los conectores

Después de los conectores, el siguiente paso es ampliar la anchura del reposacabezas **HEADALOFT 360** girando el mando de control azul situado en la parte posterior del reposacabezas.

Normalmente, solo es necesario hacerlo una vez. A menos que necesite plegar o transportar la silla de ruedas, no necesitará quitar el reposacabezas.

La posición del reposacabezas debe ajustarse en función de las necesidades del usuario y esto se hace después de fijar la unidad a la silla de ruedas.

La anchura del reposacabezas **HEADALOFT 360** es el único ajuste que debe realizarse antes de montarlo. En las secciones siguientes se describen otros ajustes, como la altura y la inclinación.



Para ajustar y fijar el reposacabezas a la silla de ruedas:

1. Ajuste la anchura del reposacabezas tirando ligeramente hacia fuera del mando de control azul y girando hacia la derecha para aumentar la anchura del panel del reposacabezas.	
2. Si ha extendido demasiado el reposacabezas, puede girar el mando de control hacia la izquierda para reducir la anchura. Los dos lados aumentarán o disminuirán al mismo tiempo, manteniendo simétricas las distancias en ambos lados.	
5. Abra las dos taquillas laterales azules de los conectores.	
6. Inserte los postes de soporte en los conectores y bloquee el reposacabezas en el conector.	

Nota:

El mando de control azul debe mirar hacia la parte trasera de la silla de ruedas y los cojines y el reposacabezas deben mirar hacia la parte delantera.

Opciones de ajuste

HEADALOFT 360 es totalmente personalizable para adaptarse al tamaño, la posición y las necesidades de casi todos los usuarios. En general, mientras que la anchura solo debe ajustarse una vez para que quede bien sujeta a la silla de ruedas, puede ser necesario realizar otros ajustes más a menudo.

Mientras que muchas personas prefieren la posición de la cabeza centrada para alguien sentado recto, **HEADALOFT 360** ofrece una gran flexibilidad al permitirle ajustar la inclinación para alguien que prefiere o necesita inclinarse hacia adelante y/o ajustar para aquellos que prefieren o necesitan inclinarse hacia el lado izquierdo o derecho sin dejar de tener la cabeza asegurada.

Estos ajustes pueden realizarse rápida y fácilmente con la frecuencia necesaria, según el estado y las preferencias de cada persona.

Nota:

Antes de ajustar la altura, la inclinación o la simetría del reposacabezas, se recomienda colocar la pieza de cinta craneal adecuada en el reposacabezas.

Ajuste de la altura

El primer y más común ajuste que debe hacerse es para la altura del reposacabezas **HEADALOFT 360** en relación con la cabeza del usuario. Esto puede hacerse de forma aproximada antes de que el usuario se siente en la silla y ajustarse después. En la mayoría de los casos, la altura debe ajustarse a cada persona. En la práctica, esto debe comprobarse y ajustarse según sea necesario, incluso cuando el uso de la silla de ruedas esté restringido a un solo usuario.

Nota:

Al ajustar la altura del reposacabezas, es muy importante soltar primero los cierres de plástico situados en cada pértiga telescópica.

Para ajustar la altura:

1. Suelte primero el bloqueo superior y luego el inferior, según sea necesario. En cada pértiga hay dos cerraduras. Para desbloquear cada una, tire de la cerradura hacia la posición abierta. La apertura de ambos cierres permite extender las pértigas telescópicas hasta la altura máxima	
2. Una vez desbloqueadas las pértigas, utilice el asa situada en la parte superior del reposacabezas para tirar de él y elevarlo a la altura deseada. Dado que el reposacabezas se ha fijado simétricamente, mantendrá el mismo nivel en ambos lados de la silla de ruedas al subirla o bajarla.	
3. Cuando haya identificado la altura óptima para el usuario, cierre bien el bloqueo inferior y después el superior. Esto bloqueará los postes de soporte en la posición actual y mantendrá el reposacabezas en su sitio.	 
4. En caso necesario, coloque la cinta en la frente del usuario y compruebe que esta es la posición correcta. Además de la altura, también puede ajustar la inclinación y la simetría del reposacabezas. Tenga en cuenta que si cambia la inclinación o la simetría, es posible que tenga que volver a ajustar la altura.	

Ajuste de la inclinación

El ajuste de inclinación ofrece la posibilidad de inclinar el **HEADALOFT 360** 90 grados hacia delante o 30 grados hacia atrás, para proporcionar un rango de flexibilidad de 120 grados. Esto significa que **HEADALOFT 360** ofrece una flexibilidad total que garantiza que la cabeza del usuario esté

segura y no se caiga hacia adelante, incluso cuando el usuario está físicamente inclinado hacia adelante o incluso ligeramente hacia atrás. Lo mejor es realizar un ajuste preliminar antes de colocar al usuario en la silla. Pero después, la inclinación debe ajustarse para optimizar el ángulo y maximizar la seguridad y la comodidad. Ajustar el ángulo de inclinación también puede mejorar la capacidad del usuario para interactuar con otras personas en la zona.

Nota:

Al ajustar la inclinación, deberá comprobar que la altura sigue ajustada correctamente. Si es necesario ajustar la altura, es muy importante soltar primero los cierres de plástico superiores situados en cada poste de soporte y luego, según sea necesario, soltar el inferior para extender aún más los postes de soporte.

Para ajustar la inclinación del reposacabezas

1. Pulse y mantenga pulsados simultáneamente los dos botones azules situados en cada uno de los conectores.	
2. Mientras pulsa los botones de control del conector, utilice los pulgares para empujar los postes de soporte hacia delante. Existe una amplia variedad de opciones que le permiten seleccionar cómo desea que HEADALOFT 360 controle y ajuste el ángulo del cuerpo y la cabeza del usuario.	
3. Cuando encuentre el ángulo que se adapte al usuario, mueva suavemente los postes de soporte hacia delante o hacia atrás en cualquier dirección hasta que oiga que los conectores encajan en su sitio y, a continuación, suelte los botones azules de control de los conectores.	
4. Una vez que haya ajustado la inclinación, es probable que tenga que ajustar también la pieza del reposacabezas. Para ello, mantenga pulsados los botones situados debajo de las dos cuñas situadas a ambos lados del reposacabezas.	
5. Ajuste el ángulo de la pieza de cabeza hasta que se haya optimizado para el usuario. Hay 10 configuraciones diferentes, que ofrecen una opción casi totalmente flexible para todos.	
6. Una vez realizados los ajustes, coloque la cinta contra la frente del usuario y compruebe que esta es la posición correcta.	

Ajuste para un uso asimétrico

Una posición «no simétrica» es cuando la cabeza del usuario está inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha. Debido a que alguien puede preferir sentarse en una posición «no simétrica», el flexible **HEADALOFT 360** ofrece la posibilidad de ajustar la posición del reposacabezas en una posición asimétrica, como más cerca del lado izquierdo o derecho de la silla de ruedas.

Además, esta función asimétrica también puede combinarse con el ajuste de inclinación, que se utiliza cuando el usuario desea inclinarse hacia delante. Tanto la inclinación como los ajustes asimétricos pueden requerir que verifique y/o cambie la altura. Es importante acordarse de soltar los cierres de plástico (primero el superior y luego el inferior) situados en los postes de apoyo antes de realizar cualquier ajuste.

Nota: Todos los ajustes pueden utilizarse individualmente, en cualquier combinación, o todos al mismo tiempo, por ejemplo, inclinados y escorados hacia la izquierda, y a cualquier altura.

Después de ajustar la posición simétrica o asimétrica de la cabeza, debe comprobar de nuevo que el ajuste de altura sigue siendo óptimo para las necesidades del usuario y asegurarse de bloquear firmemente los postes de soporte.

So stellen Sie die asymmetrische Verwendung ein

1. Mantenga pulsado el centro del mando de control azul situado en la parte posterior del reposacabezas.	
2. Mientras pulsa el botón, mueva suavemente el reposacabezas hacia la izquierda o la derecha, dependiendo de hacia dónde desee inclinarse el usuario. Continúe ajustándolo hasta que haya encontrado la posición óptima para el usuario.	
3. 3. Suelte el botón interior del mando de control azul. Asegúrese de oír un clic que indica que el reposacabezas está bloqueado.	
4. Coloque la cinta sobre el usuario y compruebe que esta es la posición correcta.	

Ajuste del posicionamiento lateral

Para ofrecer más flexibilidad y satisfacer las necesidades de cualquier persona, los cojines laterales pueden ajustarse de varias maneras para ofrecer apoyo lateral. Entre las opciones se incluyen:

- **Ajuste del reposacabezas a la izquierda, a la derecha o a ambos lados en una posición fija:**

Esto significa que uno o ambos lados quedan bloqueados en la posición seleccionada y sujetarán firmemente la cabeza del usuario.

- **Permite flexibilidad a la izquierda, a la derecha o a ambos lados del reposacabezas:** Esto significa no bloquear uno o ambos lados en una posición fija. Aunque esto ofrece cierto apoyo, uno o ambos lados se moverán suavemente para permitir que la cabeza del usuario se mueva más libremente a lo largo de una alineación lateral.

Ambos cojines laterales (izquierdo y derecho) pueden ajustarse independientemente como prefiera el usuario o como decida el cuidador. También pueden cambiarse fácilmente y con frecuencia, mientras el usuario está sentado en la silla. El posicionamiento lateral se controla mediante los dos botones azules situados en la parte superior del reposacabezas.

Para ajustar la posición lateral

- Bloquee uno o ambos lados del reposacabezas para obtener un reposacabezas lateral: Mantenga pulsado el botón de ajuste lateral. Esto afloja el lateral del reposacabezas permitiéndole ajustar el ángulo. Cuando haya encontrado el ángulo correcto, suelte el botón y la posición quedará fija y no se moverá.



- Dejar flexible el soporte lateral del reposacabezas: Pulse el botón de ajuste lateral. Esto aflojará el lateral del reposacabezas. Sin dejar de pulsar, gire el botón en el sentido de las agujas del reloj. Suelte el botón y el lado del reposacabezas permanecerá flexible.



Ajuste de los cojines

HEADALOFT 360 incluye una disposición modular de cojines que se fijan al reposacabezas con velcro. Pueden retirarse y lavarse tantas veces como sea necesario y luego volver a colocarse fácilmente. Aunque hay posiciones recomendadas para los cojines, la funda de tela permite colocarlos en el formato que mejor se adapte a las necesidades de cada persona.

Por ejemplo, en lugar de la formación estándar inicial, puede optar por colocar dos cojines en un lado o retirar cojines según sea necesario. Para retirar un cojín, basta con separarlo de la tela de velcro que cubre el reposacabezas. Para volver a colocar un cojín, basta con presionar firmemente la parte posterior del cojín contra la funda de tela con velcro.



Desconectar HEADALOFT 360

Para retirar **HEADALOFT 360** de la silla de ruedas, simplemente desbloquee los postes de soporte y retire el reposacabezas. Si lo hace para transportar la silla de ruedas a otro lugar, lo que requiere plegar la silla, solo tendrá que desconectar el reposacabezas. Si desea retirar completamente **HEADALOFT 360**, por ejemplo, si desea acoplarlo a otra silla de ruedas, deberá retirar tanto el reposacabezas como los conectores.

Desconectar parcialmente HEADALOFT 360

Para guardar o transportar una silla de ruedas con **HEADALOFT 360** acoplado, basta con retirar el reposacabezas. No hay razón para retirar los conectores de los postes de apoyo, ya que estos se plegarán fácilmente en la silla de ruedas cuando esté plegada para su transporte o almacenamiento.

Para desconectar HEADALOFT 360 para guardarlo o transportarlo:

1. Suelte los cierres de los conectores a ambos lados y tire del reposacabezas hacia arriba, fuera de los conectores.
2. Después de retirar el reposacabezas, asegúrese de cerrar los conectores para que no se dañen durante el transporte.

Para guardarla o transportarla, la silla de ruedas puede plegarse siguiendo las instrucciones del fabricante.



Desconecte completamente HEADALOFT 360

Si desea trasladar **HEADALOFT 360** a otra silla de ruedas o cualquier otro dispositivo de movilidad (andador, bipedestador, etc.), deberá desinstalarlo completamente, tal y como se detalla en los siguientes pasos.

Para quitar completamente HEADALOFT 360 de una silla de ruedas.

1. Desmonte el reposacabezas como se detalla en el apartado anterior.
2. Abra la conexión del puente en el conector y, utilizando la llave Allen suministrada con **HEADALOFT 360**, afloje el tornillo.
3. Retire el conector de la empuñadura de la silla de ruedas.
4. Recoja los adaptadores y colóquelos en un recipiente (o bolsa de plástico) para poder volver a utilizarlos en el futuro cuando vuelva a conectar el reposacabezas.
5. Repítelo con el segundo conector.

Instrucciones de lavado

Puede retirar los cojines de apoyo y lavarlos con las siguientes restricciones:

- La temperatura del agua no debe superar los 30 °C en el ciclo suave.
- No secar a máquina.
- No centrifugar en la lavadora.
- No escurrir.

Aunque rara vez es necesario, puede quitar y lavar la funda de tela en las mismas condiciones detalladas anteriormente.

Anexo: Cómo calcular qué adaptadores utilizar

Cada juego de adaptadores de diámetro contiene lo siguiente:

- Adaptador base
- Adaptador de 1 mm
- Adaptador de 2 mm
- Adaptador de 3 mm
- Adaptador de 4 mm
- Adaptador de 5 mm


Casi todas las sillas de ruedas del mundo tienen un diámetro de 17 a 32 milímetros (0,660 a 1,259 pulgadas). A continuación encontrará tablas que le ayudarán a calcular los adaptadores que necesitará.

Tenga en cuenta que se pueden hacer diferentes combinaciones. En el embalaje de **HEADALOFT 360** se incluye una cinta métrica con las combinaciones de adaptadores recomendadas.

El adaptador base se muestra como 0, ya que siempre se inserta en los conectores, incluso si no necesita utilizar ningún otro adaptador.

Cálculo en centímetros

En la siguiente tabla, se muestran las combinaciones de adaptadores recomendadas junto con la letra de la cinta correspondiente que aparece en la cinta de combinaciones de adaptadores que se incluye con **HEADALOFT 360**.



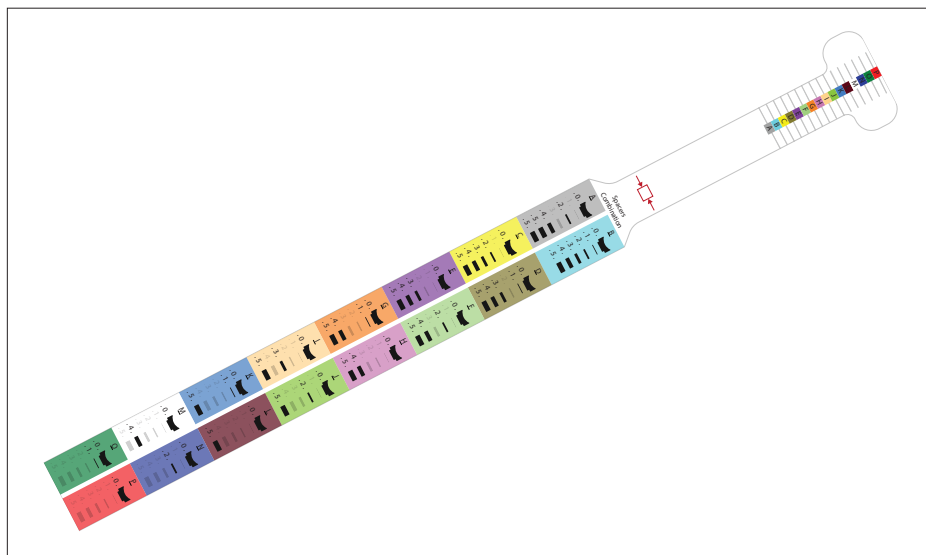


En la tabla siguiente se ofrece un ejemplo de cómo pueden combinarse los adaptadores para garantizar un ajuste seguro entre los conectores y las empuñaduras.

IMPORTANTE:

Ambos conectores deben comprobarse con detenimiento para asegurarse de que están bien sujetos al asa.

Diámetro (mm)	Cinta de carroceros	Base	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
17	A	X		X		X	X.X
18	B	X	X	X	X	X	X
19	C	X		X	X	X	X
20	D	X	X		X	X	X
21	E	X			X	X	X
22	F	X		X		X	X
23	G	X	X			X	X
24	H	X				X	X
25	I	X			X		X
26	J	X		X			X
27	K	X	X				X
28	L	X					X
29	M	X				X	
30	N	X		X			
31	O	X	X				
32	p	X					

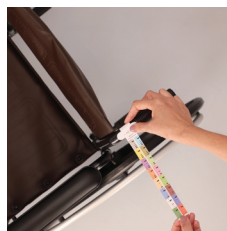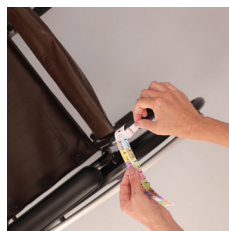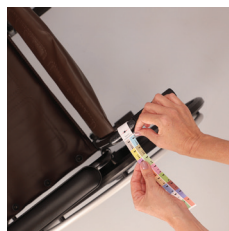

Acerca de la empresa

Headovations fue fundada en 2014 por Ben Cohen Gazit. Está dedicada a ofrecer sistemas de reposacabezas innovadores. El producto estrella de la empresa se diseñó para proteger a los niños que duermen, cuyas cabezas son más vulnerables durante los viajes en coche. La idea de proteger la cabeza de las personas se transformó rápidamente en una misión para ofrecer mejores reposacabezas a todos los que lo necesitan. **HEADALOFT 360** está diseñado para ofrecer una solución óptima y flexible para.

Table des matières

Introduction	67
Contenu de l'emballage	69
Recommandations de sécurité	70
Assistance technique.....	70
Fixation du HEADALOFT 360 au fauteuil roulant	71
Aperçu du processus d'assemblage du HEADALOFT 360.....	71
Fixation des connecteurs au fauteuil roulant	71
Réglage et insertion de l'appuie-tête à travers les connecteurs	73
Options d'ajustement	76
Réglage de la hauteur.....	77
Réglage de l'inclinaison.....	78
Ajustement pour une utilisation asymétrique	80
Réglage du positionnement latéral	81
Réglage des coussins.....	82
Retrait du HEADALOFT 360	83
Retirer partiellement le HEADALOFT 360	83
Retirer complètement le HEADALOFT 360.....	84
Instructions de lavage	84
Annexe : Calculer quels adaptateurs utiliser	84
Calcul en centimètres	85
À propos de l'entreprise	86

Introduction

Le **HEADALOFT 360** est un système d'appui-tête complet de pointe qui se fixe en toute sécurité à presque tous les fauteuils roulants, déambulateurs, aide à la verticalisation ou autres appareils pouvant être équipés d'un appui-tête. Une fois en place, le HEADALOFT 360 maintient délicatement la tête de l'utilisateur dans une position confortable, même pendant de longues périodes. À bien des égards, il peut améliorer considérablement la qualité de vie de toute personne utilisant un fauteuil roulant. Il offre une plus grande sécurité et empêche la tête de l'utilisateur de tomber vers l'avant. Grâce au **HEADALOFT 360**, les personnes peuvent communiquer en face à face avec leur entourage et souvent gagner en autonomie, se nourrir, se détendre, regarder la télévision, s'asseoir confortablement et s'intéresser à ce qui les entoure.

Le **HEADALOFT 360** est facile à assembler et peut être fixé à n'importe quel fauteuil roulant standard. Il est également facile à retirer, et il suffit de détacher l'appui-tête pour pouvoir plier le fauteuil roulant afin de le ranger ou de le transporter. Ce qui rend le **HEADALOFT 360** unique, ce n'est pas tant la facilité avec laquelle il s'installe que la flexibilité qui permet de l'ajuster facilement, que l'utilisateur soit assis droit, penché vers l'avant, vers la gauche ou la droite.


Une fois le **HEADALOFT 360** fixé au fauteuil roulant, il peut être ajusté à n'importe quelle taille, que ce soit pour un enfant ou un adulte. Outre le réglage de la largeur pour s'adapter à n'importe quel fauteuil roulant standard, vous pouvez également régler la hauteur, l'inclinaison (vers l'avant ou vers l'arrière), la symétrie (vers la gauche ou vers la droite) et l'emplacement des coussins de tête pour garantir un ajustement adéquat et personnalisé à tout utilisateur.



HEAD DOWN

HEAD UP

Aussi facile à régler pour une taille ou une position spécifique, le **HEADALOFT 360** peut également être facilement réajusté pour quelqu'un d'autre, ou même pour le même utilisateur quand il ou elle souhaite simplement changer de position. Pour rendre le **HEADALOFT 360** encore plus personnalisable, deux bandes de tailles différentes sont fournies pour assurer un appui-tête sûr et confortable. Avec toutes ces possibilités d'ajustement, le **HEADALOFT 360** est idéal pour tout le monde, du jeune enfant à l'adulte.

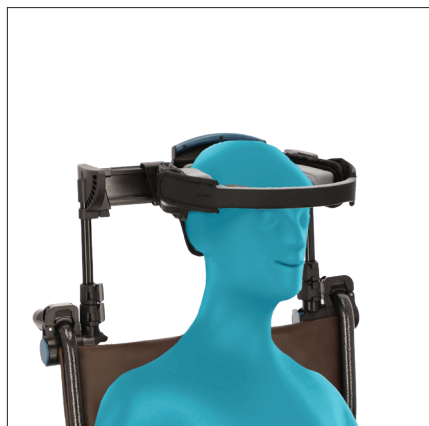

Contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage du **HEADALOFT 360** comprend les éléments suivants :

Élément	Pièce	Fonction
Unité d'appui-tête pré-assemblée (1)		• Inclut : • 5 coussins de soutien amovibles lavables en machine • Des barres télescopiques qui s'étirent et se rétractent facilement • Un adaptateur de poignée en haut pour régler facilement la hauteur de la tête
Connecteurs (2)		Raccorde le HEADALOFT 360 au fauteuil roulant*).
Adaptateurs de diamètre (2 jeux)		De petits adaptateurs de 1 mm à 5 mm sont inclus. Ils sont insérés dans les connecteurs selon les besoins pour combler l'écart entre le connecteur et le châssis du fauteuil roulant*. Ils sont conditionnés en deux jeux et 1 clé Allen.
Bandeaux de soutien antérieur (2)		Les bandeaux se fixent facilement à l'appui-tête pour fournir un soutien antérieur, empêchant la tête de l'utilisateur de tomber vers l'avant. Inclut : 2 tailles, lavable en machine.
Mètre ruban		Vous aide à déterminer si vous devez ajouter des adaptateurs pour fixer les connecteurs aux poignées de poussée.

* Également compatible avec un déambulateur, une aide à la verticalisation ou tout autre appareil pouvant être équipé d'un appui-tête.

Remarque :

Lorsque vous ouvrez l'emballage du **HEADALOFT 360** pour la première fois, vous devez orienter l'angle des barres télescopiques à 90 degrés pour pouvoir les insérer dans les connecteurs.

Recommandations de sécurité

Lors de l'installation et de l'utilisation du **HEADALOFT 360**, les précautions suivantes doivent être prises :

- **Consultez toujours un médecin, un kinésithérapeute ou d'autres prestataires de soins médicaux avant d'utiliser ce système ou tout autre système d'appui-tête.**
- L'utilisation du produit est recommandée telle que présentée et avec la recommandation d'un professionnel. Toute autre utilisation, y compris sans les coussins en tissu, relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.
- Tenez hors de portée des enfants pendant l'installation.
- Conservez les sacs en plastique fournis hors de portée des enfants, le produit contient de petites pièces.
- Il est recommandé de ne pas fixer le **HEADALOFT 360** au fauteuil roulant lorsque celui-ci est occupé. Des ajustements mineurs de l'inclinaison et de la symétrie peuvent être effectués après la fixation du **HEADALOFT 360**.
- N'essayez pas de plier le fauteuil roulant ou de démonter **HEADALOFT 360** du fauteuil roulant lorsqu'il est occupé.
- Vérifiez que les connecteurs ont été verrouillés après tout ajustement.
- Demandez et suivez les instructions médicales concernant le positionnement et/ou le déplacement de l'utilisateur du fauteuil roulant, la durée pendant laquelle l'utilisateur est autorisé à rester dans le fauteuil roulant, etc.
- Lorsque vous fixez le **HEADALOFT 360** au fauteuil roulant, assurez-vous d'utiliser la base et la bonne combinaison d'adaptateurs pour garantir une connexion sûre et antidérapante entre l'appui-tête et le fauteuil roulant.
- Les coussins de tête réglables doivent être lavés régulièrement. Si le **HEADALOFT 360** est utilisé par plus d'un utilisateur, les coussins de tête réglables doivent être désinfectés à chaque fois que son utilisateur change.

Assistance technique

Headovations, l'équipe de développement du **HEADALOFT 360**, se soucie de ses clients et de ses utilisateurs. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser le **HEADALOFT 360**, nous vous encourageons à nous contacter via l'une des manières suivantes :

- Par l'intermédiaire de nos revendeurs et partenaires locaux
- **Par e-mail : info@headovations.com**

Vous pouvez également en savoir plus sur le système **HEADALOFT 360** en vous abonnant à notre chaîne YouTube.

Fixation du HEADALOFT 360 au fauteuil roulant

Le **HEADALOFT 360** permet à la quasi-totalité des fauteuils roulants et des dispositifs similaires qui peuvent accueillir un appui-tête de soutenir pleinement la tête de l'utilisateur à tous les angles et à toutes les hauteurs. La fixation

du **HEADALOFT 360**, pour n'importe quel fauteuil roulant standard, ne prend que quelques instants. Elle ne requiert qu'un seul outil, la clé Allen incluse dans l'emballage du **HEADALOFT 360**.

Aperçu du processus d'assemblage du HEADALOFT 360

La fixation du **HEADALOFT 360** à un fauteuil roulant suit les étapes suivantes :

Les connecteurs :

- Ajoutez des adaptateurs de diamètre pour assurer un ajustement serré autour des poignées de poussée du fauteuil roulant, selon vos besoins.
- Fixez les connecteurs au fauteuil roulant.
- Serrez les vis de chaque poignée de poussée pour vous assurer que les connecteurs sont bien fixés

Les barres télescopiques :

- Après avoir retiré l'appui-tête de la boîte, appuyez sur les boutons latéraux et modifiez l'angle des barres télescopiques pour obtenir un angle de 90 degrés.
- Insérez les barres télescopiques du panneau d'appui-tête dans les connecteurs.
- Effectuez les réglages finaux en fonction des besoins de l'utilisateur, notamment en ce qui concerne la hauteur, l'inclinaison, la symétrie et la latéralité.

Remarque :

Chacune de ces étapes est expliquée plus en détail ci-dessous.

Pour en savoir plus sur le réglage du **HEADALOFT 360** adapté aux besoins spécifiques de l'utilisateur en fauteuil roulant, voir Options de réglage.

Fixation des connecteurs au fauteuil roulant


Les fauteuils roulants standard disposent généralement de poignées de poussée d'un diamètre compris entre 17 et 32 millimètres. Le **HEADALOFT 360** est livré avec un adaptateur de base et adaptateurs de portée individuels (mesurant : 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 et 5 mm).



Ces adaptateurs de portée peuvent être combinés à volonté pour combler l'écart qui se produit lorsque les connecteurs sont fixés aux poignées de poussée des fauteuils roulants. Par exemple, si les poignées de poussée ont un diamètre de 24 mm, vous pouvez utiliser les 1 mm, 4mm et 5 mm. Des adaptateurs servant à combler l'écart et assurer un ajustement sûr.

Pour fixer les connecteurs :

Utilisez le mètre ruban pour mesurer la circonférence. La lettre que vous verrez correspond au diamètre que vous devez atteindre lorsque vous ajoutez des adaptateurs.

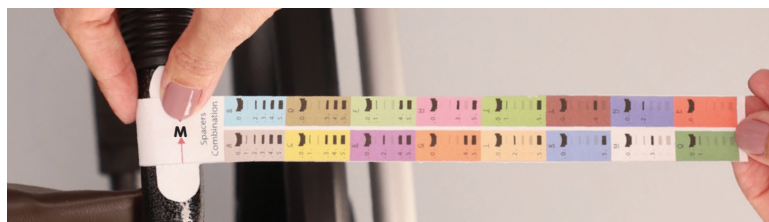

1. Insérez l'adaptateur de base dans la partie supérieure de l'adaptateur, puis ajoutez le ou les adaptateur(s) de portée approprié(s), comme mesuré à l'étape précédente. Les adaptateurs s'insèrent fermement dans la partie supérieure du connecteur.
2. Ouvrez la poignée d'un connecteur et placez-la autour d'une des poignées de poussée du fauteuil roulant.
3. Refermez la partie supérieure du connecteur sur la base et les adaptateurs et, à l'aide de la clé Allen fournie dans l'emballage de HEADALOFT 360, serrez la vis pour fixer le connecteur à la poignée de poussée.
4. Répétez la même procédure en utilisant les adaptateurs du second jeu fourni dans l'emballage du HEADALOFT 360 pour le second connecteur de l'autre poignée de poussée.



IMPORTANT : il convient de vérifier soigneusement que les deux connecteurs sont bien fixés à la poignée.

Remarque :

Pour calculer quels adaptateurs utiliser, voir l'annexe : Calculer quels adaptateurs utiliser.

Idéalement, les connecteurs doivent être placés contre la partie métallique des poignées du fauteuil roulant et non contre les protections en caoutchouc. Toutefois, si vous estimez que les connecteurs offrent plus d'avantages en matière de sécurité ou de positionnement approprié, vous pouvez fixer les connecteurs aux poignées en caoutchouc.

À l'aide de la clé Allen, il est recommandé de serrer légèrement une vis, puis de fixer et de serrer légèrement la deuxième vis. Redressez le connecteur, puis serrez fermement les deux vis.



Remarque :

Il faut veiller à fixer chacun des connecteurs au même endroit relatif sur chaque poignée du fauteuil roulant.

Une fois que les connecteurs sont fixés au fauteuil roulant, ils peuvent y rester, même lors du stockage ou du transport du fauteuil roulant. Vous n'aurez besoin de retirer les connecteurs que si vous souhaitez démonter et fixer le **HEADALOFT 360** sur un autre fauteuil roulant.

Réglage et insertion de l'appui-tête à travers les connecteurs

Après les connecteurs, l'étape suivante consiste à élargir l'appui-tête HEADALOFT 360 en tournant le bouton de commande bleu situé à l'arrière de l'appui-tête.

Normalement, vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois. Sauf si vous devez plier ou transporter le fauteuil roulant, vous n'aurez pas besoin d'enlever l'appui-tête.

La position de l'appui-tête doit être ajustée en fonction des besoins de l'utilisateur, ce qui est fait une fois que l'unité est fixée au fauteuil roulant.

La largeur de l'appui-tête **HEADALOFT 360** est le seul réglage à effectuer avant de le monter. Les sections suivantes décrivent d'autres réglages, tels que la hauteur et l'inclinaison.



Pour régler et fixer l'appui-tête au fauteuil roulant :

1. Réglez la largeur de l'appui-tête en tirant légèrement sur le bouton de commande bleu et en le tournant vers la droite pour augmenter la largeur du panneau de l'appui-tête.	
2. Si vous avez trop étendu l'appui-tête, vous pouvez tourner le bouton de commande vers la gauche pour en réduire la largeur. Les deux côtés se relèveront ou s'abaisseront en même temps, les distances entre les deux côtés restant symétriques.	
3. Ouvrez les deux verrous latéraux bleus sur les connecteurs.	
4. Insérez les barres de maintien dans les connecteurs et verrouillez l'appui-tête au connecteur.	

marque :

Le bouton de commande bleu doit être orienté vers l'arrière du fauteuil roulant et les coussins et l'appui-tête doivent être orientés vers l'avant.
the front.

Options de réglage

Le **HEADALOFT 360** est entièrement personnalisable pour s'adapter à la taille, à la position et aux besoins de presque tous les utilisateurs. En général, si la largeur ne doit être ajustée qu'une seule fois pour que le fauteuil roulant soit bien fixé, d'autres ajustements peuvent être nécessaires plus fréquemment.

Bien que de nombreuses personnes préfèrent la position de la tête centrée pour une personne assise droite, le **HEADALOFT 360** offre une grande flexibilité en vous permettant de régler l'inclinaison pour une personne qui préfère ou doit se pencher vers l'avant et/ou de régler pour ceux qui préfèrent ou doivent se pencher vers le côté gauche ou droit tout en gardant leur tête sécurisée.

Ces réglages peuvent être effectués rapidement et facilement, aussi souvent que nécessaire, en fonction de l'état et des préférences de chaque individu.

Remarque :

Avant de régler la hauteur, l'inclinaison ou la symétrie de l'appui-tête, il est recommandé de fixer le bandeau approprié à l'appui-tête.

Réglage de la hauteur

Le premier réglage à effectuer, et le plus courant, porte sur la hauteur de l'appui-tête **HEADALOFT 360** par rapport à la tête de l'utilisateur. Cette valeur peut être estimée avant que l'utilisateur ne s'installe dans le fauteuil, puis ajustée par la suite. Dans la plupart des cas, la hauteur doit être adaptée à chaque personne. Dans la pratique, il convient de vérifier et d'ajuster ce point si nécessaire, même si l'utilisation du fauteuil roulant est limitée à un seul utilisateur.

Remarque :

Lors du réglage de la hauteur de l'appui-tête, il est très important de débloquer d'abord les verrous en plastique situés sur chaque poteau télescopique.

Pour régler la hauteur :

1. Débloquez d'abord le verrou supérieur, puis le verrou inférieur, selon les besoins. Chaque barre comporte deux verrous. Pour les déverrouiller, tirez le verrou en position ouverte. L'ouverture des deux verrous vous permet d'étendre les barres télescopiques à la hauteur maximale



2. Une fois les barres déverrouillées, utilisez la poignée située en haut de l'appui-tête pour tirer et soulever l'appui-tête à la hauteur souhaitée. L'appui-tête ayant été fixé de manière symétrique, il conservera la même hauteur des deux côtés du fauteuil roulant lorsqu'il sera levé ou abaissé.



3. Lorsque vous avez identifié la hauteur optimale pour l'utilisateur, fermez fermement le verrou du bas, puis le verrou du haut. Cela bloque les barres de maintien dans la position actuelle et maintient l'appui-tête en place.



4. Si nécessaire, placez le bandeau sur le front de l'utilisateur et vérifiez que la position est correcte. Outre le réglage de la hauteur, vous pouvez également régler l'inclinaison et la symétrie de l'appui-tête. Notez que si vous modifiez l'inclinaison ou la symétrie, vous devrez peut-être réajuster la hauteur.



Réglage de l'inclinaison

Le réglage de l'inclinaison offre la possibilité d'incliner le **HEADALOFT 360** de 90 degrés vers l'avant ou de 30 degrés vers l'arrière, pour offrir une plage de flexibilité de 120 degrés. Cela signifie que le **HEADALOFT 360** offre une flexibilité totale, garantissant que la tête de l'utilisateur est sécurisée et ne tombera pas vers l'avant, même si l'utilisateur est physiquement penché vers l'avant ou même légèrement vers l'arrière. Il est préférable d'effectuer un réglage préliminaire avant d'installer l'utilisateur dans le fauteuil. Mais ensuite, l'inclinaison doit être réglée pour optimiser l'angle afin de maximiser la sécurité et le confort. Le réglage de l'angle d'inclinaison peut également améliorer la capacité de l'utilisateur à interagir avec les autres personnes présentes dans la zone.

Remarque :

Lorsque vous réglez l'inclinaison, vous devez vérifier que la hauteur est toujours réglée correctement. Si la hauteur doit être ajustée, il est très important de débloquer d'abord les verrous en plastique supérieurs situés sur chaque poteau de support, puis, si nécessaire, de débloquer les verrous du bas afin de pouvoir étirer davantage les barres de maintien.

Pour régler l'inclinaison de l'appui-tête :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons bleus situés sur chacun des connecteurs et maintenez-les enfoncés.	
2. Tout en appuyant sur les boutons de commande du connecteur, utilisez vos pouces pour pousser les barres de maintien vers l'avant. Il existe une grande variété d'options vous permettant de choisir comment vous voulez que le HEADALOFT 360 contrôle et ajuste l'angle du corps et de la tête de l'utilisateur.	
3. Lorsque vous avez trouvé l'angle qui convient à l'utilisateur, déplacez doucement les barres de maintien vers l'avant ou vers l'arrière dans l'une ou l'autre direction jusqu'à ce que vous entendiez les connecteurs s'enclencher, puis relâchez les boutons de commande bleus des connecteurs.	
4. Une fois que vous aurez réglé l'inclinaison, vous devrez probablement régler également l'appui-tête. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les boutons situés sous les deux cales situées de part et d'autre de l'appui-tête et de les maintenir enfoncés.	
5. Ajustez l'angle de la pièce de tête jusqu'à ce qu'il convienne parfaitement à l'utilisateur. Il existe 10 réglages différents, ce qui permet à chacun d'y trouver sa position idéale.	
6. Une fois les réglages effectués, placez le bandeau contre le front de l'utilisateur et vérifiez que la position est correcte.	

Réglage en cas d'utilisation asymétrique

On parle de position « non symétrique » lorsque la tête de l'utilisateur penche vers la gauche ou vers la droite. Parce qu'une personne peut préférer s'asseoir dans une position « non symétrique », le **HEADALOFT 360** flexible offre la possibilité d'ajuster la position de l'appui-tête dans une position asymétrique, par exemple plus proche du côté gauche ou droit du fauteuil roulant.

En outre, cette fonction asymétrique peut également être combinée avec le réglage de l'inclinaison, qui est utilisé lorsqu'un utilisateur souhaite se pencher vers l'avant. Les réglages de l'inclinaison et de l'asymétrie peuvent nécessiter une vérification et/ou une modification de la hauteur. Il est important de ne pas oublier de débloquer les verrous en plastique (d'abord celui du haut, puis celui du bas) situés sur les barres de maintien avant de procéder à des ajustements.

Remarque : tous les réglages peuvent être utilisés individuellement, dans n'importe quelle combinaison, ou tous en même temps, par exemple, inclinés et penchés vers la gauche, et à n'importe quelle hauteur.

Après avoir ajusté la position symétrique ou asymétrique de la tête, vous devez à nouveau vérifier que le réglage de la hauteur est toujours optimisé pour les besoins de l'utilisateur et vous assurer que vous verrouillez fermement les barres de maintien.

Pour l'ajustement à une utilisation asymétrique

1. Appuyez sur le centre du bouton de commande bleu situé à l'arrière de l'appui-tête et maintenez-le enfoncé.	
2. Tout en appuyant sur le bouton, déplacez doucement l'appui-tête vers la gauche ou la droite, selon la position dans laquelle l'utilisateur souhaite se pencher. Continuez à effectuer ce réglage jusqu'à ce que vous ayez trouvé la position optimale pour l'utilisateur.	
3. Relâchez le bouton intérieur du bouton de commande bleu. Assurez-vous que vous entendez un clic, indiquant que l'appui-tête est verrouillé en place.	
4. Placez le bandeau sur l'utilisateur et vérifiez que la position est correcte.	

Réglage du positionnement latéral

Pour offrir une plus grande flexibilité et répondre aux besoins de chacun, les coussins latéraux peuvent être réglés de plusieurs façons pour offrir un soutien latéral. Les options comprennent :

- **Réglage des côtés gauche, droit ou des deux côtés de l'appui-tête en position fixe :**

- Cela signifie que l'un ou l'autre des côtés, ou les deux, sont bloqués dans la position sélectionnée et soutiennent fermement la tête de l'utilisateur.

- **Permettre la flexibilité à gauche, à droite ou des deux côtés de l'appui-tête:**

cela signifie qu'il ne faut pas bloquer l'un ou les deux côtés dans une position fixe.

Bien que cela offre un certain soutien, l'un ou l'autre des côtés, ou les deux, bougeront légèrement pour permettre à la tête de l'utilisateur de se déplacer plus librement avec un alignement latéral.

Les deux coussins latéraux (gauche et droit) peuvent être réglés indépendamment, selon les préférences de l'utilisateur ou celles de la personne qui s'occupe de lui. Ils peuvent également être changés facilement et souvent, pendant que l'utilisateur est assis dans le fauteuil. Le positionnement latéral est contrôlé par les deux boutons bleus situés en haut de l'appui-tête.

Pour régler le positionnement latéral

- Verrouillez un ou les deux côtés de l'appui-tête pour obtenir un appui-tête latéral : appuyez sur le bouton de réglage latéral et maintenez-le enfoncé. Cela permet de desserrer le côté de l'appui-tête et d'en régler l'angle. Lorsque vous avez trouvé l'angle idéal, relâchez le bouton et la position devient fixe et ne bougera plus.



- **Laissez le support latéral de l'appui-tête souple :**

appuyez sur le bouton de réglage latéral. Cela permettra de desserrer le côté de l'appui-tête. Tout en continuant à appuyer vers le bas, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Relâchez le bouton et le côté de l'appui-tête restera flexible.



Réglage des coussins

Le **HEADALOFT 360** inclut un arrangement modulaire de coussins qui se fixent à l'appui-tête à l'aide d'une bande velcro. Ils peuvent être retirés et lavés aussi souvent que nécessaire, puis facilement remis en place. Bien qu'il y ait des positions recommandées pour les coussins, la housse en tissu vous permet de fixer les coussins dans le format qui répond le mieux aux besoins de l'individu.

Par exemple, au lieu de l'agencement standard initial, vous pouvez choisir de placer deux coussins d'un côté ou d'enlever des coussins selon les besoins. Pour retirer un coussin, il suffit de le détacher du tissu velcro qui recouvre l'appui-tête. Pour rattacher un coussin, il suffit de presser fermement l'arrière du coussin contre la housse en tissu velcro.



Réglage des coussins

Pour retirer le **HEADALOFT 360** du fauteuil roulant, il suffit de déverrouiller les barres de maintien et d'enlever l'appui-tête. Si vous le faites pour transporter le fauteuil roulant vers un autre endroit, ce qui nécessite de le plier, il vous suffit de retirer l'appui-tête. Si vous souhaitez retirer complètement le **HEADALOFT 360**, par exemple pour le fixer sur un autre fauteuil roulant, vous devez retirer l'appui-tête et les connecteurs.

Retirer partiellement le HEADALOFT 360

Pour ranger ou transporter un fauteuil roulant avec le **HEADALOFT 360** attaché, il suffit d'enlever l'appui-tête. Il n'y a pas lieu d'enlever les connecteurs des barres de maintien, car ils se plient facilement dans le fauteuil roulant lorsqu'il est replié pour le transport ou le stockage.

Pour retirer le HEADALOFT 360 pour le stockage ou le transport :

1. Relâchez les verrous des connecteurs des deux côtés et tirez l'appui-tête vers le haut, hors des connecteurs.
2. Après avoir retiré l'appui-tête, veillez à fermer les connecteurs pour éviter qu'ils ne soient endommagés pendant le transport.



Retirer complètement le HEADALOFT 360

Si vous souhaitez utiliser le **HEADALOFT 360** sur un autre fauteuil roulant ou tout autre appareil de mobilité (déambulateur, aide à la verticalisation, etc.), vous devrez le désinstaller complètement, comme indiqué dans les étapes suivantes.

Pour retirer complètement le HEADALOFT 360 d'un fauteuil roulant :

1. Retirez l'appuie-tête comme indiqué dans la section précédente.
2. Ouvrez le pont de connexion sur le connecteur et, à l'aide de la clé Allen fournie avec le **HEADLOFT 360**, desserrez la vis.
3. Retirez le connecteur de la poignée de poussée du fauteuil roulant.
4. Récupérez les adaptateurs et placez-les dans un récipient (ou un sac en plastique) afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement lorsque l'appui-tête sera reconnecté.
5. Répétez l'opération avec le deuxième connecteur.

Instructions de lavage

Vous pouvez retirer les coussins de soutien et les laver avec les restrictions suivantes : Water temperature should not be higher than 30° C/ 86° F on Gentle Cycle

- La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 30° C en cycle doux
- Ne pas sécher en machine.
- Ne pas faire essorer dans la machine à laver.
- Ne pas essorer à la main.

Bien que cela soit rarement nécessaire, vous pouvez retirer et laver la housse en tissu dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

Annexe : Calculer quels adaptateurs utiliser

Chaque jeu d'adaptateurs de diamètre contient les éléments suivants : Base Adapter

- Adaptateur de base
- Adaptateur 1 mm
- Adaptateur 2 mm
- Adaptateur 3 mm
- Adaptateur 4 mm
- Adaptateur 5 mm


Presque tous les fauteuils roulants du monde ont un diamètre de 17 à 32 millimètres. Les tableaux suivants vous aideront à calculer les adaptateurs dont vous aurez besoin.

Notez que différentes combinaisons sont possibles. L'emballage du **HEADALOFT 360** inclut un mètre ruban indiquant les combinaisons d'adaptateurs recommandées.

L'adaptateur de base est affiché comme 0, car il est toujours inséré dans les connecteurs, même si vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres adaptateurs.

Calcul en centimètres

Dans le tableau suivant, les combinaisons d'adaptateurs recommandées sont affichées avec la lettre de la bande correspondante qui apparaît sur la bande des combinaisons d'adaptateurs fournie avec le **HEADALOFT 360**.

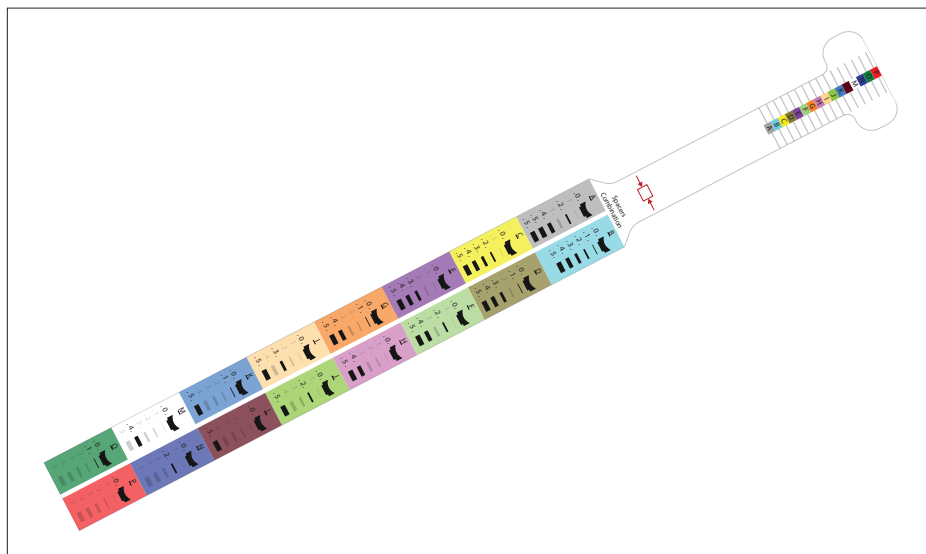

Le tableau suivant donne un exemple de la manière dont les adaptateurs peuvent être combinés pour assurer un ajustement sûr entre les connecteurs et les poignées de poussée.

IMPORTANT :
Il convient de vérifier soigneusement que les deux connecteurs sont bien fixés à la poignée

Diamètre (mm.)	Lettre du mètre	Base	1 mm.	2 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.
17	A	X		X		X	X.X
18	B	X	X	X	X	X	X
19	C	X		X	X	X	X
20	D	X	X		X	X	X
21	E	X			X	X	X
22	F	X		X		X	X
23	G	X	X			X	X
24	H	X				X	X
25	I	X			X		X
26	J	X		X			X
27	K	X	X				X
28	L	X					X
29	M	X				X	
30	N	X		X			
31	O	X	X				
32	p	X					



À propos de l'entreprise

Headovations a été fondée en 2014 par Ben Cohen Gazit. Le produit phare de l'entreprise a été conçu pour protéger les enfants endormis dont la tête est la plus vulnérable pendant les trajets en voiture. L'idée de protéger la tête des gens s'est rapidement transformée en une mission visant à fournir de meilleurs appuis-tête à tous ceux qui en ont besoin. Le **HEADALOFT 360** est conçu pour fournir une solution optimale et flexible pour

UFHS-001-GL



In Partnership with:



HEADOVATIONS LTD | 3 Adirim st. Tel-Aviv 6918414 Israel



Obelis s.a
Bld. Général Wabis, 53,
Brussels, 1030, Belgium



HEADOVATIONS LTD

3 Adirim st. Tel-Aviv
6918414 Israel

Version: July 2023\2nd Rev
Product May Differ From Shown

headalofft360.com

